



इंस्ट्रक्शन मैनुअल



ईल्यूपिहेलर ई-ल्यूपिहेलर (स्मार्ट ड्राई पाउडर इनहेलर)

लूपिन लिमिटेड

मुंबई

विषय-सूची

ई-ल्यूपिहेलर के बारे में	3
ई-ल्यूपिहेलर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?	3
ई-ल्यूपिहेलर दवा नियमित रूप से लेने में कैसे मदद करता है?	3
ई-ल्यूपिहेलर सांस से जुड़ी समस्याओं को बेहतर करने में कैसे मदद करता है?	3
ई-ल्यूपिहेलर के पार्ट्स	4
मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना	12
डिवाइस चालू करना	17
दवा लेने का समय निर्धारित करना	18
ई-ल्यूपिहेलर से दवा कैसे लें	21
केयरटेकर जोड़ना	27
केयरटेकर की प्रक्रिया	29
बैटरी की अवधि	34
सुरक्षा संबंधी सावधानियां	34
उपयोग किए गए चिन्ह	35
चेतावनियां	36
महत्वपूर्ण जानकारी	36

ई-ल्यूपिहेलर के बारे में

- ई-ल्यूपिहेलर एक स्मार्ट, ब्लूटूथ से चलने वाला ड्राई पाउडर इनहेलर है।
- यह इनहेलर आपके द्वारा दवा लेने की तारीख और समय और तकनीक (आप कितनी गहराई से और कितनी देर तक सांस लेते हैं) को रिकॉर्ड करता है।
- एंड्रॉइड ओएस वर्जन 7.0 और उसके बाद के वर्जन और एप्पल आईओएस 16.0 (आईफोन 12 और उसके बाद के वर्जन) के अनुकूल मोबाइल ऐप की मदद से आप इन रिकॉर्डिंग को रिव्यू के लिए अपने स्मार्टफोन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने केयरटेकर और डॉक्टर को भी इस जानकारी का आकलन करने की अनुमति दे सकते हैं।
- डिवाइस के इस्तेमाल के दौरान दो एलर्जी के जरिए विजुअल संकेत दिए जाते हैं। ये आपको सांस लेने का सही क्रम बताते हैं।
- ई-ल्यूपिहेलर मोबाइल ऐप के जरिए आपको रोजाना दवा की खुराक लेने के लिए रिमाइंडर मिल सकते हैं, ताकि आप सही समय पर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा ले सकें।
- आपकी वर्तमान लोकेशन के आधार पर मोबाइल ऐप पर वायु गुणवत्ता विवरण, हवा की गति और तापमान की वास्तविक समय की जानकारी दिखाई जाती है, जिससे आपको बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा के साथ तैयार रहने में मदद मिल सकती है।
- मोबाइल ऐप रोजाना, साप्ताहिक या मासिक आधार पर इस्तेमाल की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराता है, जिससे आप अपने डीपीआई के इस्तेमाल पर नजर रख सकते हैं।

ई-ल्यूपिहेलर आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- ई-ल्यूपिहेलर के साथ अपने इलाज को नियमित रूप से जारी रखना आसान है, जिससे आपको समय पर राहत मिल सकती है।
- दवा नियमित रूप से लेने से बीमारी को बढ़ने से रोकने और आपके जीवन की गुणवत्ता बेहतर करने में भी मदद मिल सकती है।


ई-ल्यूपिहेलर दवा नियमित रूप से लेने में कैसे मदद करता है?

- ई-ल्यूपिहेलर ऐप डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक की फ्रीक्वेंसी (दिन में एक बार/दो बार आदि) के अनुसार समय पर डीपीआई लेने के लिए रिमाइंडर/सूचना देता है।
- ई-ल्यूपिहेलर ऐप आपके वर्तमान डीपीआई डिवाइस से ली गई खुराकों की संख्या दिखाता है।

ई-ल्यूपिहेलर सांस से जुड़ी समस्याओं को बेहतर करने में कैसे मदद करता है?

- सांस लेने से संबंधित जानकारी दर्ज और सुरक्षित की जाती है और फिर सांस लेने की गुणवत्ता मापने के लिए मोबाइल ऐप में भेजी जाती है। रंगों के संकेत, विवरण और ग्राफ की मदद से मोबाइल ऐप, उपयोगकर्ता को सांस लेने की तकनीक समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे दवा के प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

ई-ल्यूपिहेलर के पार्ट्स

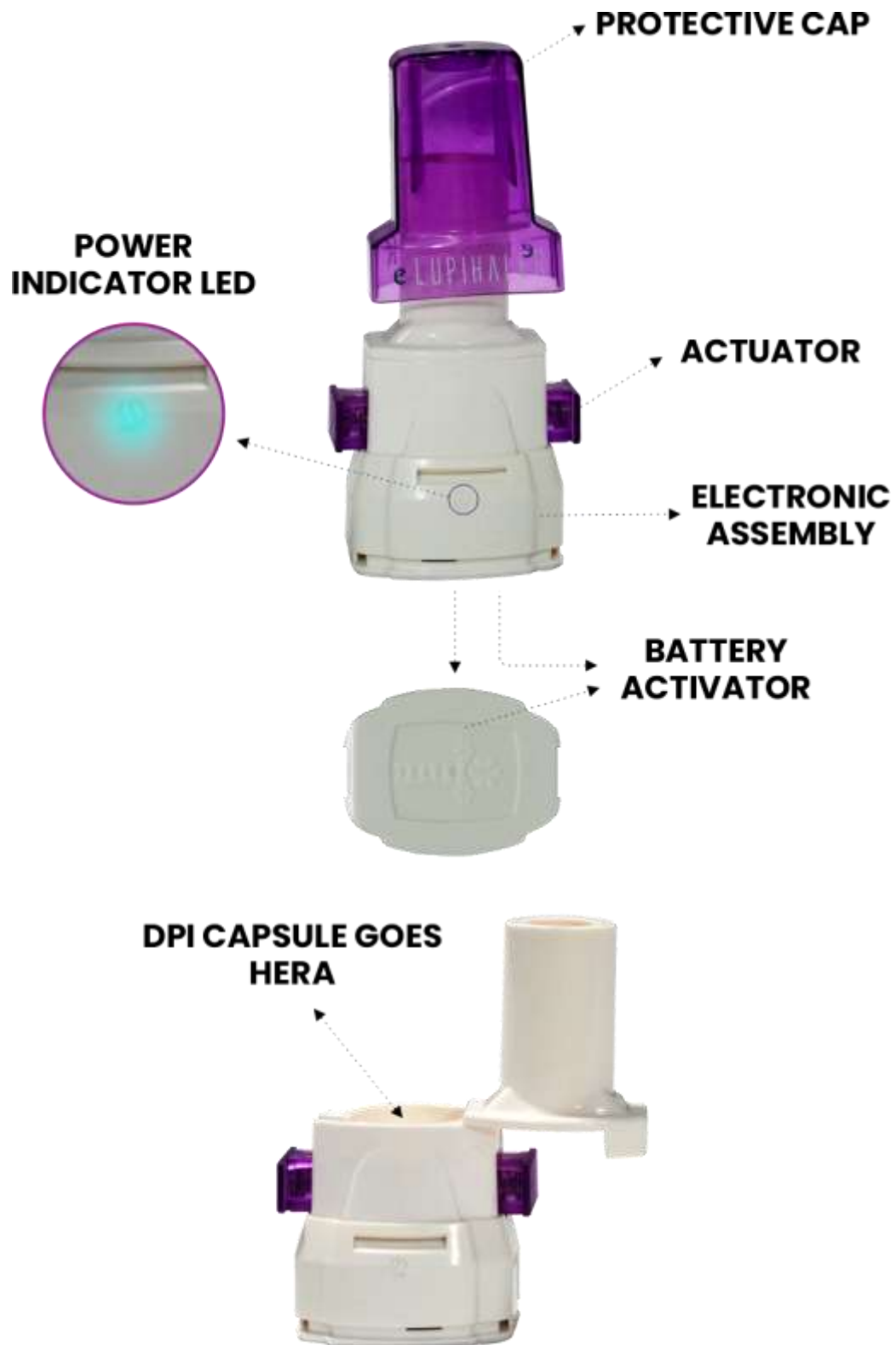

ELUPIHALER को अनबॉक्स करना

- बॉक्स को सीधा रखें और बीच से डिवाइस को सावधानीपूर्वक बाहर निकालें।



- eLupihaler ऐप डाउनलोड करने के लिए बाईं ओर दिए गए QR कोड को स्कैन करें।




ई-ल्यूपिहेलर का उपयोग


- ई-ल्यूपिहेलर की वेलकम स्क्रीन को पहली बार शुरू होने में कुछ सेकेंड लगते हैं।



- जारी रखें पर क्लिक करें, क्योंकि डेटा का आदान-प्रदान करने के लिए डिवाइस को ब्लूटूथ की अनुमति आवश्यक होती है।
- आपके वर्तमान लोकेशन की सटीक वायु गुणवत्ता की जानकारी देने के लिए लोकेशन की अनुमति आवश्यक होती है।

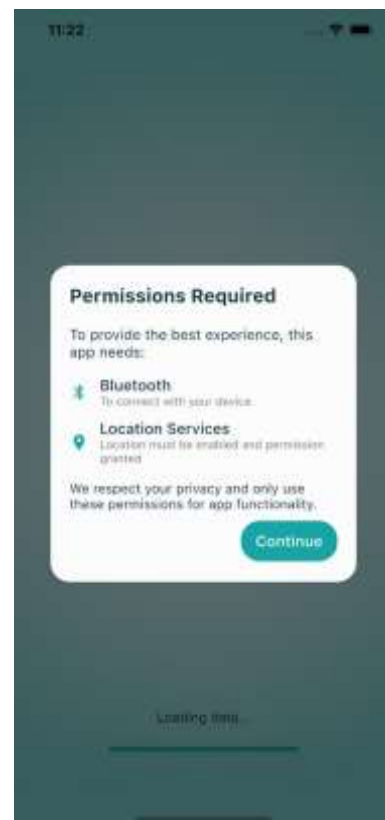


- सभी निर्देश पढ़ लेने के बाद कृपया मैं समझता/समझती हूँ और जारी रखें बटन पर क्लिक करें।

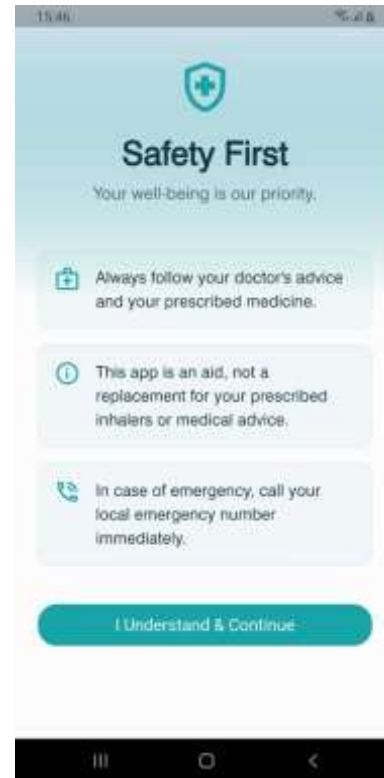


- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद चेकबॉक्स पर क्लिक करें।



- एसएमएस में प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें बटन पर क्लिक करें या यदि आपको ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है, तो 60 सेकेंड की गिनती पूरी होने के बाद ओटीपी दोबारा भेजें का अनुरोध करें।

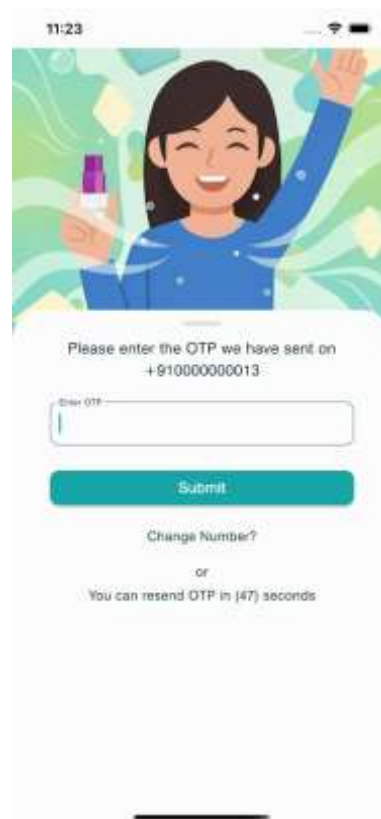


- भविष्य में ऐप का उपयोग करने और इसे अनधिकृत इस्तेमाल से सुरक्षित रखने के लिए आप 4 अंकों का एमपिन सेट कर सकते हैं या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण चालू कर सकते हैं।

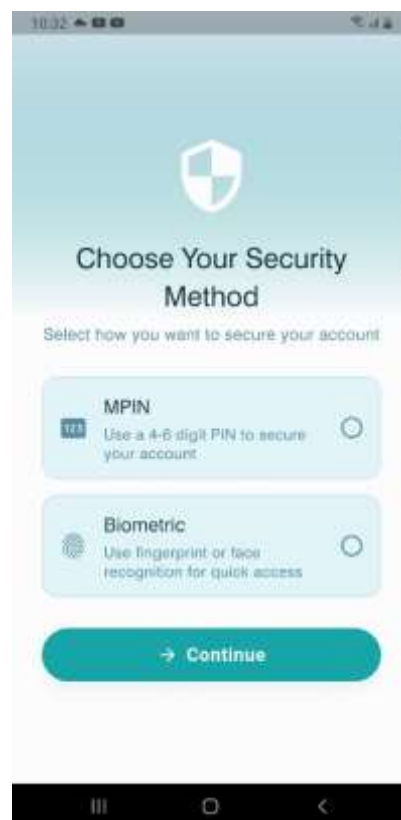


- यदि आपने एमपिन का विकल्प चुना है, तो 4 अंकों का एमपिन सेट करें और उसकी पुष्टि करें।




- ई-ल्यूपिहेलर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की पुष्टि करें या उसे अधिकृत करें।

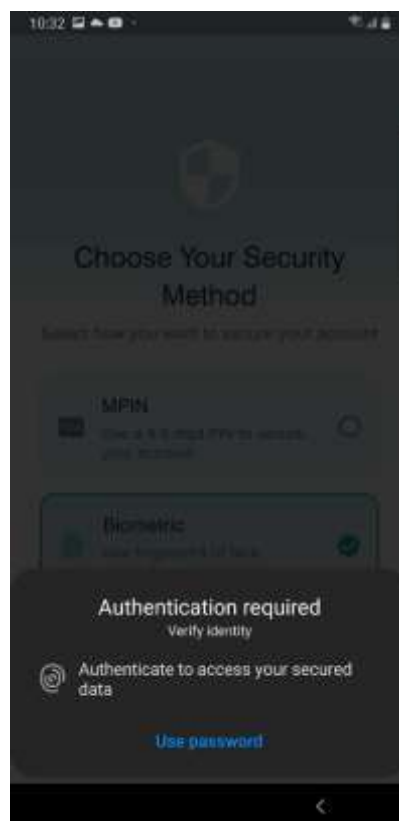


- कृपया मरीज या केयरटेकर के रूप में अपनी भूमिका चुनें।
- मरीज की भूमिका के लिए जारी रखने हेतु > बटन पर क्लिक करें।
- केयरटेकर की भूमिका के लिए [केयरटेकर प्रक्रिया](#) सेक्शन देखें।

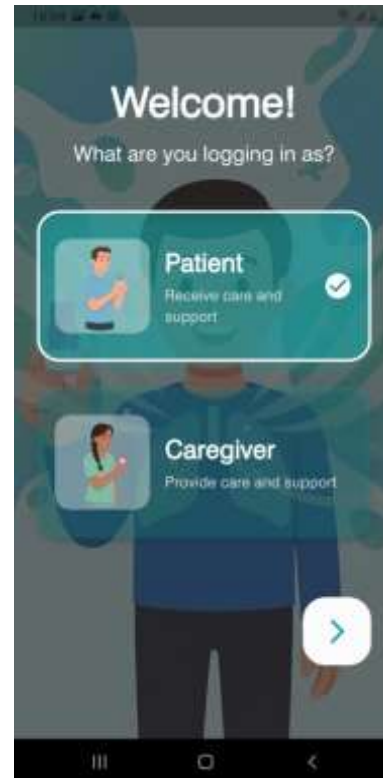

- कृपया अपने चयन की पुष्टि करें।

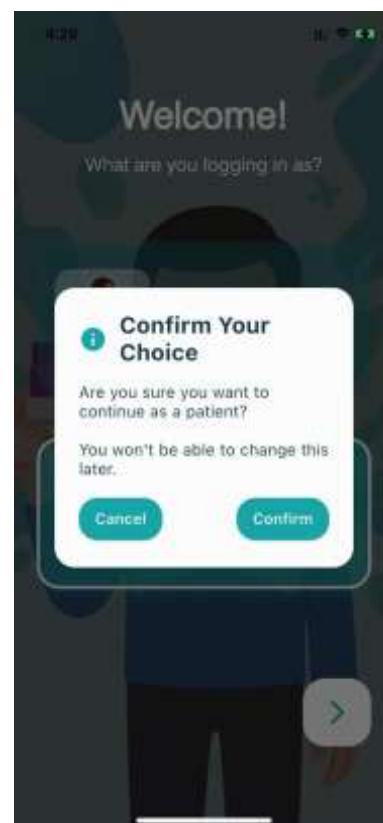

- अपनी प्रोफाइल की बेसिक जानकारी दर्ज करने के लिए जारी रखें (> बटन) पर क्लिक करें।

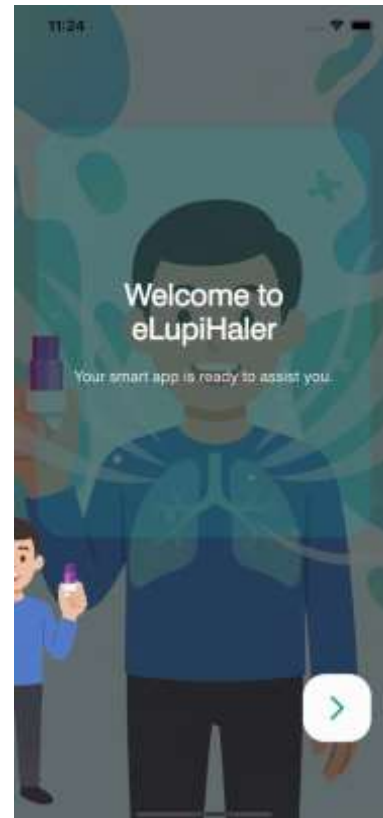

- नाम, लिंग आदि जैसी बेसिक जानकारी भरकर अपनी प्रोफाइल पूरी करें।


मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना

अगली स्क्रीन आपको पहली बार ई-ल्यूपिहेलर को मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने में मदद करेगी।

- बॉक्स को सीधा रखें और डिवाइस को ऊपर से सावधानीपूर्वक बॉक्स से बाहर निकालें।



- जैसा दिखाया गया है, इनहेलर को सावधानीपूर्वक पकड़कर ट्रे से बाहर निकालें।

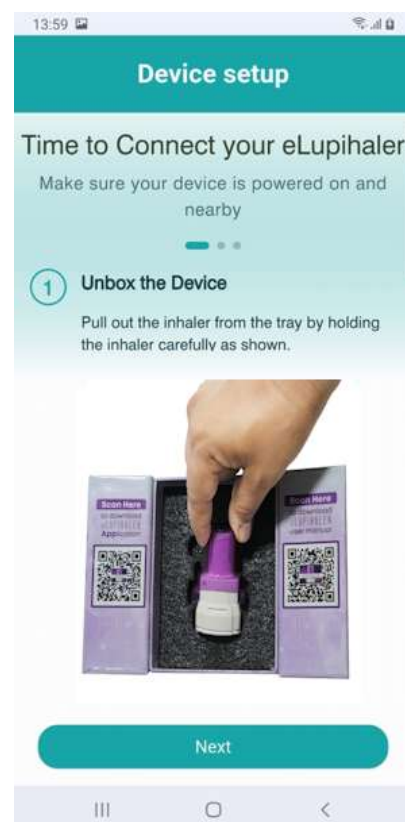

- डिवाइस का इस्तेमाल करते समय इनहेलर को इस तरह पकड़ें कि पावर इंडिकेटर एलईडी आपकी ओर रहे।




- डिवाइस की बैटरी चालू करें - डिवाइस को थोड़ा झुकाएं और बटन कवर को धीरे से दबाएं, जब तक कि वह मुख्य डिवाइस में मजबूती से क्लिक होकर लग न जाए।




- डिवाइस चालू होने के बाद, उसके पेयर होने तक नीली एलईडी हर 2 सेकेंड में झपकती रहेगी।




- डिवाइस जोड़ें पर क्लिक करके डिवाइस को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करने की प्रक्रिया शुरू करें।

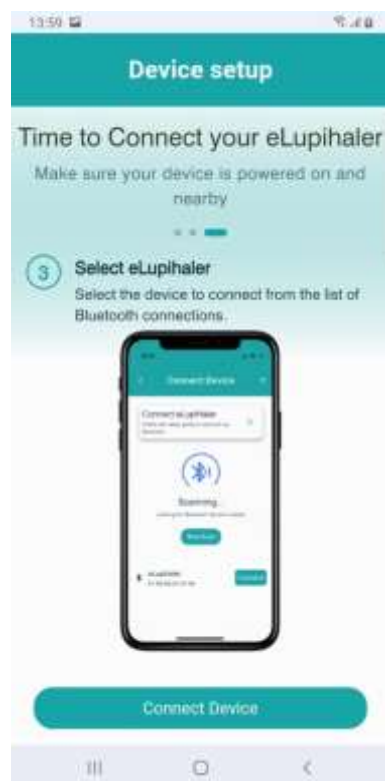


- ई-ल्यूपिहेलर डिवाइस को खोजने के लिए डिवाइस खोजें पर क्लिक करें।

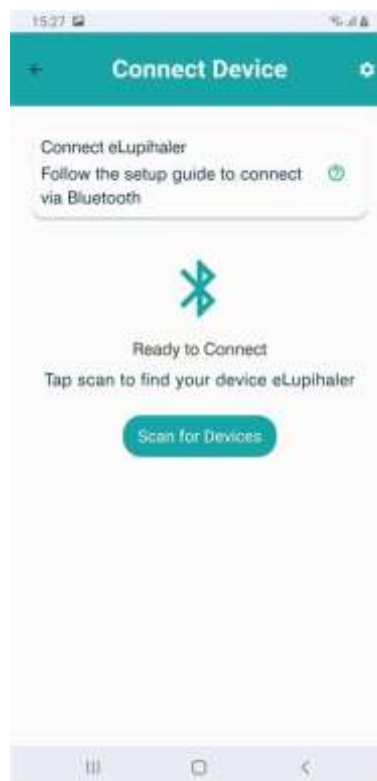

- स्कैन किए गए ई-ल्यूपिहेलर डिवाइस की सूची में अपने डिवाइस पर क्लिक करके उसे कनेक्ट/पेयर करें।
- अगर आपका डिवाइस सूची में दिखाई नहीं देता है, तो जांचें कि आपके डिवाइस की नीली लाइट झपक रही है या नहीं। अगर आपको कोई नीली लाइट दिखाई नहीं देती है, तो डिवाइस चालू करें सेक्शन देखें।

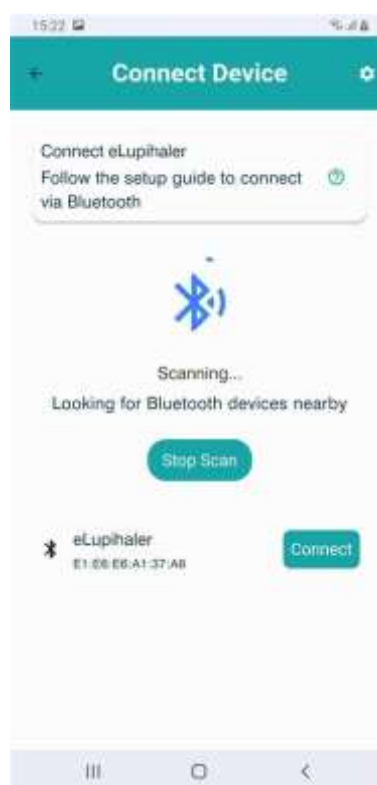

- डिवाइस सफलतापूर्वक पेयर होने के बाद, स्क्रीन पर डिवाइस से जुड़ी सभी जानकारी के साथ इसकी पुष्टि दिखाई देगी।
- अब डिवाइस सेटअप पूरी हो गई है और आप अपनी दवा लेने का समय निर्धारित कर सकते हैं।

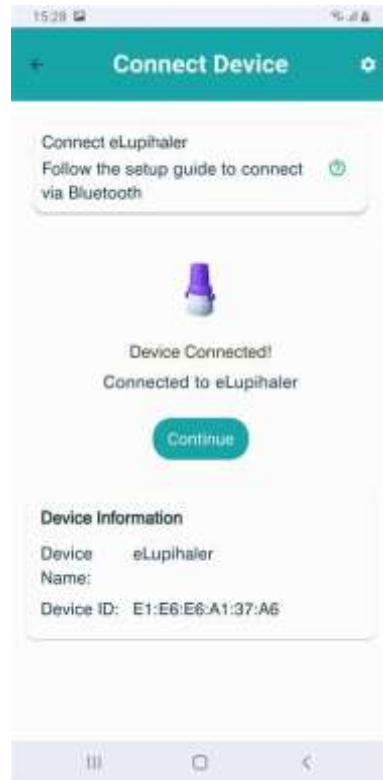

डिवाइस चालू करना

अगर आप शुरुआत में डिवाइस को मोबाइल ऐप से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो अगली स्क्रीन आपको डिवाइस को मोबाइल ऐप से कनेक्ट करने की प्रक्रिया बताएगी।

- डिवाइस को स्कैन करते समय अगर ऐप ई-ल्यूपिहेलर का कोई डिवाइस ⓘ सूची में नहीं दिखा पाता है, तो दोबारा स्कैन करें पर क्लिक करने से पहले आइकॉन पर क्लिक करें।



- इस प्रक्रिया में आपकी मदद करने के लिए मदद की पॉप-अप स्क्रीन दिखाई देगी।



दवा लेने का समय निर्धारित करना

आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा और दवा को लेने का समय जोड़ सकते हैं या उसे बदल सकते हैं।

दवा जोड़ें।

- अपनी दवाएं जोड़ना शुरू करें।



- आप किसी खास दवा को खोज सकते हैं और सूची में दी गई दवाओं के आगे > बटन पर क्लिक करके दवा की अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं।




- आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुराक की जानकारी के साथ सुबह, दोपहर या शाम का समय चुन सकते हैं।




- अगर आपके पास और दवाएं शामिल करने के लिए हैं (आपके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार), तो डीपीआई जोड़ें पर क्लिक करें।
- अगर आपने अपनी दवाओं की जानकारी पूरी कर ली है, तो नहीं, मेरे पास कोई अन्य डीपीआई नहीं है पर क्लिक करें।



- आप ऐप में दवा लेने के समय के लिए अलर्ट/रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं।

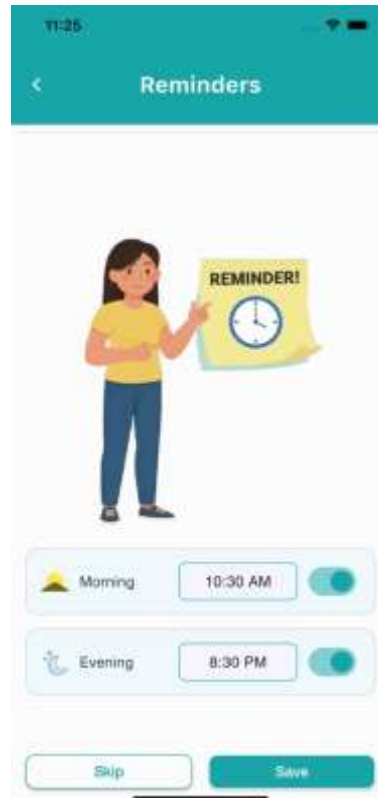

- अपनी प्रोफाइल में सभी दवाएं सेव करने के बाद शुरू करें पर क्लिक करें।

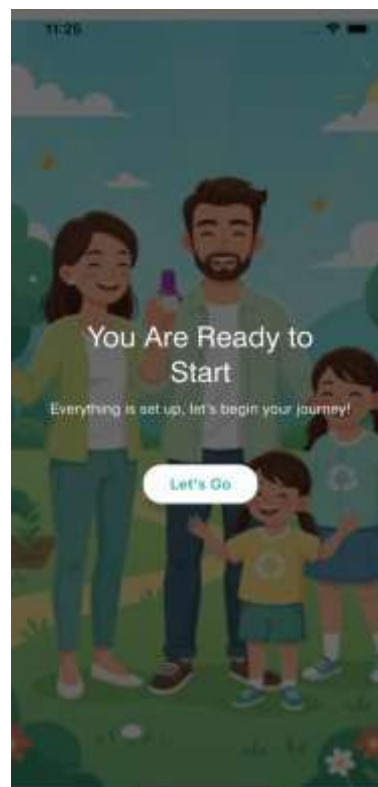

ई-ल्यूपिहेलर से दवा कैसे लें

डिवाइस से सफलतापूर्वक कनेक्ट होने के बाद, नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप मोबाइल ऐप के साथ या उसके बिना इनहेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

- इनहेलर से सुरक्षा कैप हटाएं और इनहेलर को इस तरह पकड़ें कि पावर इंडिकेटर या एलईडी आपकी ओर रहे।



- इनहेलर के निचले हिस्से को मजबूती से पकड़ें और माउथपीस को तीरों की दिशा में घुमाकर इनहेलर खोलें।



- एक कैप्सूल लें और उसे इनहेलर के कैप्सूल चैम्बर में रखें।
- जांचें कि कैप्सूल चैम्बर के अंदर कैप्सूल पूरी तरह से रखा गया है या नहीं।
- अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो कैप्सूल को सही तरीके से रखें।




- माउथपीस को वापस बंद स्थिति में घुमाकर इनहेलर बंद करें।




- इनहेलर को सीधा रखें, यानी माउथपीस ऊपर की ओर रहे, और पुश बटन को अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़ें। इनहेलर को इस तरह पकड़ें कि पावर इंडिकेटर या एलईडी आपकी ओर रहे।
- दोनों उंगलियों से इन बटनों को एक साथ एक बार तेज और मजबूती से दबाएं। अब कैप्सूल में समान रूप से छेद हो गए हैं।




- डिवाइस की दोनों एलईडी धीरे-धीरे झपकने लगेंगी। इस समय अगर आपका मोबाइल फोन पास में है, तो वास्तविक समय में सांस लेने की निगरानी के लिए आप डिवाइस को स्कैन करके पेयर कर सकते हैं।
- यह संकेत है कि आपको सांस लेने की तैयारी के लिए अपने फेफड़ों को खाली करना है।
- डिवाइस को अपने मुंह से थोड़ा दूर रखें और एलईडी के झपकने पर ध्यान देते हुए धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़कर अपने फेफड़ों को खाली करें।

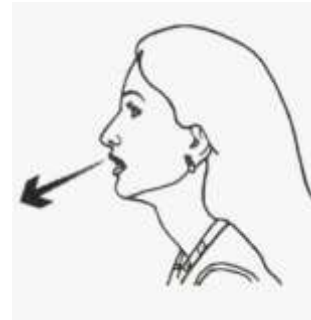

- फेफड़ों को खाली करने के बाद इनहेलर को अपने मुंह के पास लाएं और उसे सीधा करके पकड़ें।
- अपने सिर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं।
- इनहेलर के माउथपीस को अपने मुंह के अंदर दांतों के पीछे और जीभ पर पूरी तरह से रखें।
- माउथपीस के चारों ओर अपने होंठों को कसकर बंद करें।
- जितनी गहरी सांस ले सकते हैं, उतनी गहरी सांस तेज और लगातार अंदर लें।
- अगर इनहेलर सही तरीके से काम कर रहा है, तो उसमें खड़खड़ाहट की आवाज आएगी, क्योंकि पाउडर को फैलाने के लिए कैप्सूल चैम्बर के अंदर घूमने लगता है।

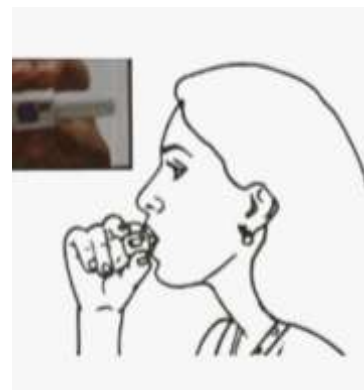

- इनहेलर को अपने मुंह से हटा लें। लगभग 5-10 सेकेंड तक अपनी सांस रोककर रखें, ताकि आपके फेफड़े दवा को अंदर ले सकें। धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें। इनहेलर खोलकर जांचें कि कैप्सूल खाली है या नहीं। अगर खाली नहीं है, तो सांस लेने की प्रक्रिया दोहराएं।

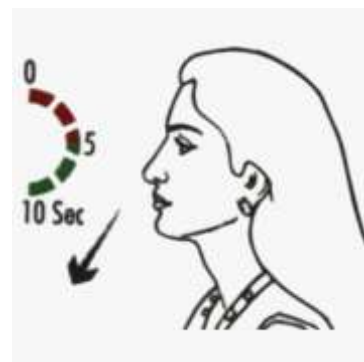

- सांस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पानी से अपना मुंह कुल्ला करें; पानी न निगलें। इनहेलर खोलें और खाली कैप्सूल निकालें। सुरक्षा कैप को वापस इनहेलर पर लगा दें।



- डेटा सिंक करना:
 - जब इनहेलर आपके मोबाइल में ई-ल्यूपिहेलर ऐप से जुड़ा होता है, तो डेटा अपने आप सिंक हो जाता है।
- इनहेलर की सफाई:
 - अपने ई-ल्यूपिहेलर के किसी भी हिस्से को पानी से न धोएं और न ही उसे पानी में डालें। ई-ल्यूपिहेलर में पाउडर होता है और इसे हमेशा साफ और सूखा रखना चाहिए।
 - अगर माउथपीस को साफ करने की जरूरत हो, तो उसे सूखे कपड़े या टिश्यू से धीरे से पोंछें।



सांस लेने की रिपोर्ट देखना

डिवाइस के जरिए कलेक्ट की गई आपकी सांस लेने संबंधी जानकारी मोबाइल ऐप में सुरक्षित रहती है और ऐप के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देती है। ये निर्देश आपको रिपोर्ट दूढ़ने, देखने और तैयार करने में मदद करेंगे, जिन्हें पीडीएफ फॉर्मेट में दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है।


- आपकी  होम स्क्रीन पर दवा नियमित रूप से लेने का विवरण ऐप के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देता है।
- दवा नियमित रूप से लेने की जानकारी को न्यूमेरिक ब्रेकडाउन के साथ ग्राफिकल (फ्यूल गेज) फॉर्मेट में दिखाया जाता है।




- दवा नियमित रूप से लेने की जानकारी कैलेंडर के रूप में भी देखी जा सकती है, जिसमें छूटी हुई, समय पर और आगामी खुराक के संकेत दिए जाते हैं।



- रिपोर्ट बटन पर  क्लिक करने पर दवा लेने की हिस्ट्री सूची में दिखाई देती है।
- सांस लेने से संबंधित जानकारी का विवरण देखने के लिए आप किसी भी रिपोर्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

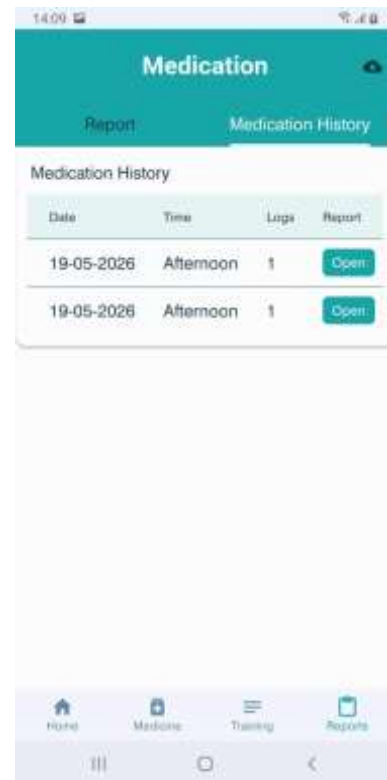

- सांस लेने की जानकारी फ्लो रेट बनाम समय ग्राफ के रूप में दिखाई जाती है, जिससे आपको अपनी सांस लेने की तकनीक का विश्लेषण करने और उसकी तुलना सुझाई गई तकनीक से करने में मदद मिलती है।
- रिपोर्ट में फ्लो रेट, समय और कुल परिणाम की गुणवत्ता संबंधी रेटिंग के साथ प्रभावशीलता बेहतर करने के लिए दिए गए सुझाव भी दिखाई देंगे।

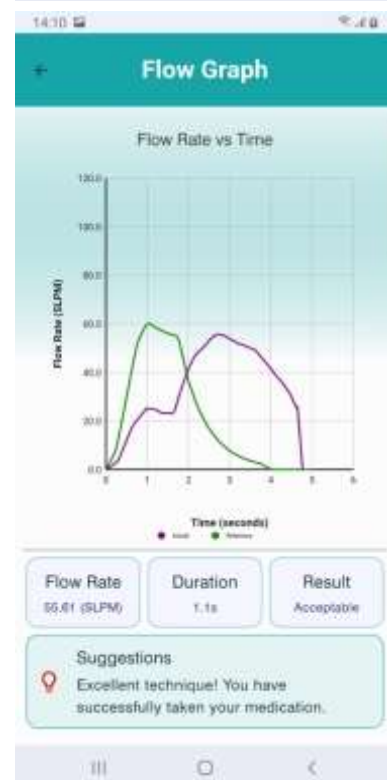

दवा लेने की योजना में बदलाव करें।

- दवा लेने की योजना में बदलाव करने के लिए अपनी प्रोफाइल में दी गई दवा पर क्लिक करें।

टिप्पणी: नई दवा जोड़ने के लिए दवा जोड़ें प्रक्रिया देखें।



- आप सुबह, दोपहर, शाम पर क्लिक करके दवा लेने के समय में बदलाव कर सकते हैं।
- आप प्रत्येक निर्धारित समय के लिए एक या एक से अधिक खुराक भी निर्धारित कर सकते हैं।




केयरटेकर जोड़ना

ऐप आपको अपनी प्रोफाइल में किसी स्वास्थ्य देखभालकर्ता या परिवार के सदस्य को केयरटेकर की भूमिका में जोड़ने की सुविधा देता है। उन्हें जोड़ने के लिए बस नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। वे आपके स्वास्थ्य में सहायता करने के लिए आपकी दवा से संबंधित रिकॉर्ड और हिस्ट्री पर नजर रख सकेंगे।


- होम स्क्रीन के नीचे आपको केयरटेकर का सेक्शन मिलेगा। केयरटेकर जोड़ने के लिए कृपया केयरटेकर जोड़ें बटन पर क्लिक करें।




- अनुरोध शुरू करने के लिए आपसे केयरटेकर का मोबाइल नंबर देने के लिए कहा जाएगा।

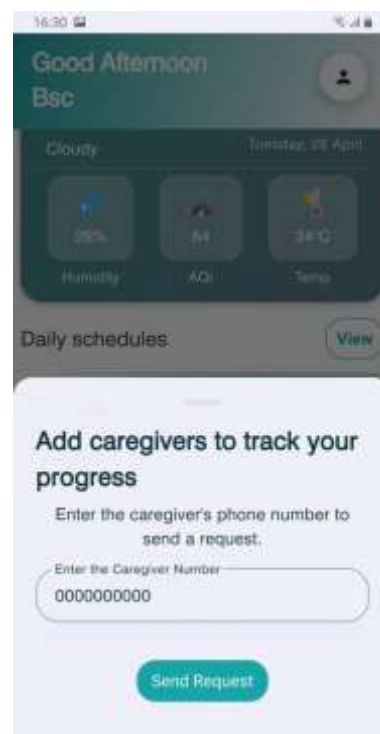

- आप केयरटेकर सेक्शन में अनुरोध की स्थिति देख सकेंगे।

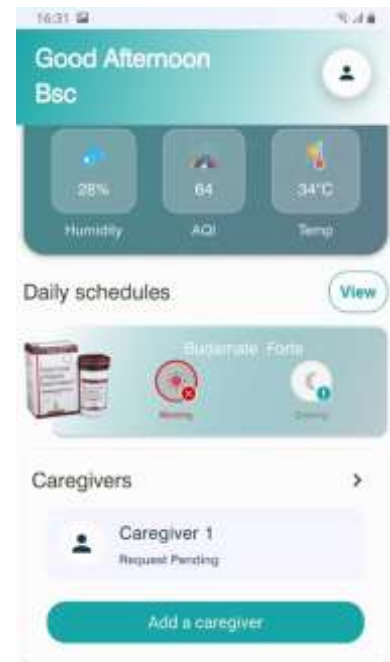


- अनुरोध सफलतापूर्वक स्वीकृत होने के बाद आपको केयरटेकर का विवरण दिखाई देगा।
- आप अपनी जरूरत के अनुसार एक या एक से अधिक केयरटेकर जोड़ सकेंगे।
- आप हटाएं बटन पर क्लिक करके किसी खास केयरटेकर को हटा सकते हैं या अलग कर सकते हैं।

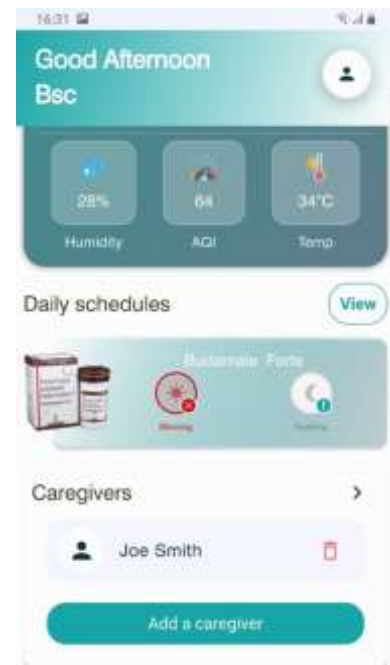


केयरटेकर की प्रक्रिया

अगर आपने शुरुआत में केयरटेकर की भूमिका चुनी है, तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।


- कृपया मरीज या केयरटेकर के रूप में अपनी भूमिका चुनें।
- केयरटेकर की भूमिका के लिए केयरटेकर की प्रक्रिया सेक्शन देखें।

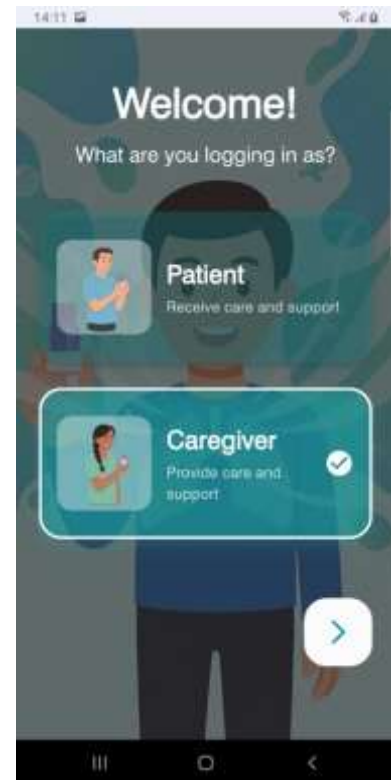

- अपने चयन की केयरटेकर के रूप में पुष्टि करें।

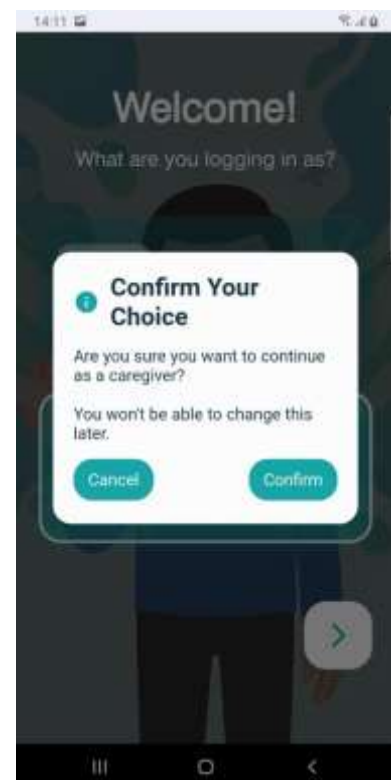


- अपनी प्रोफाइल की बेसिक जानकारी दर्ज करने के लिए जारी रखें (> बटन) पर क्लिक करें।

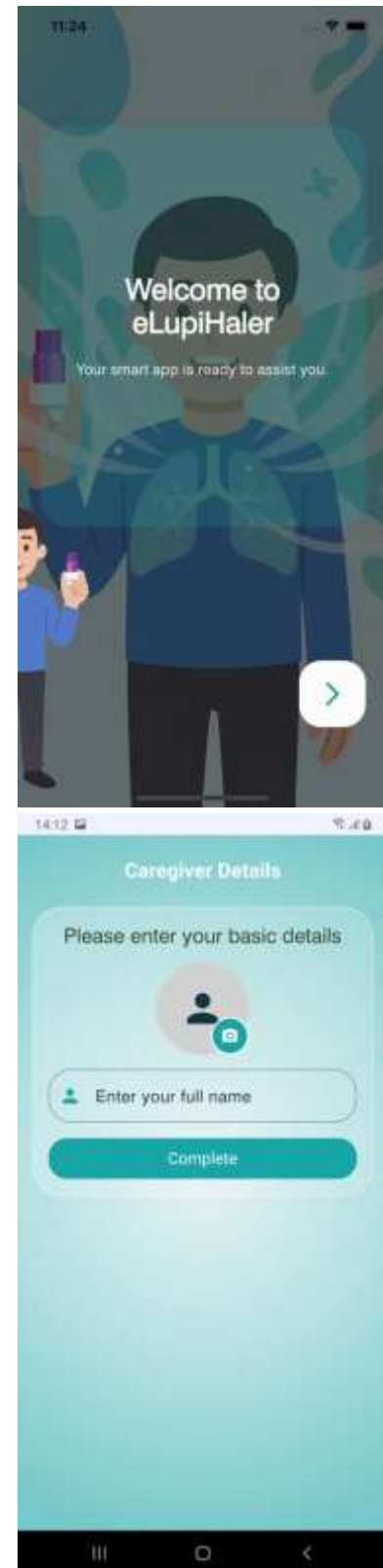


- अपना नाम दर्ज करके अपनी प्रोफाइल पूरी करें।

- केयरटेकर की भूमिका के तहत सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की सूची होगी, जिन्होंने आपको अपने केयरटेकर के रूप में जोड़ा है।
- आप अलग-अलग व्यक्तियों के अनुरोधों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेंगे।

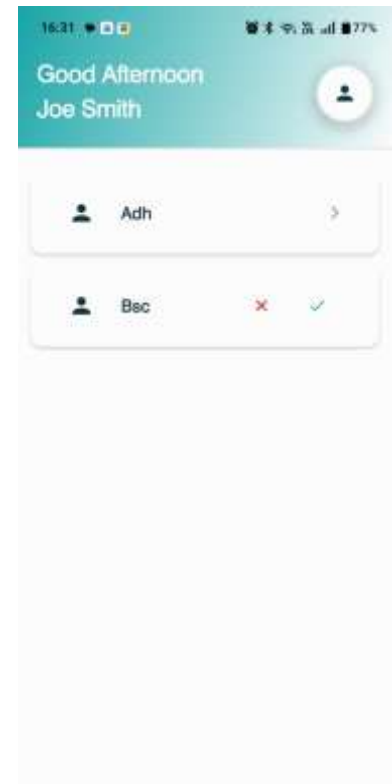


- अनुरोध स्वीकार करने के बाद > बटन पर क्लिक करके आप चुने गए व्यक्तियों की दवा और दवा लेने के विवरण से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे।

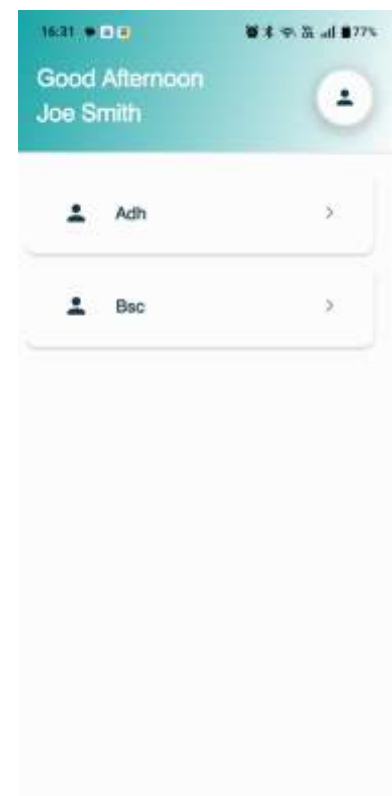

- मरीज के रिकॉर्ड पर क्लिक करने पर आपको मरीज की स्क्रीन पर ले जाया जाएगा।



- मरीज से जुड़े कुछ आंकड़े देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

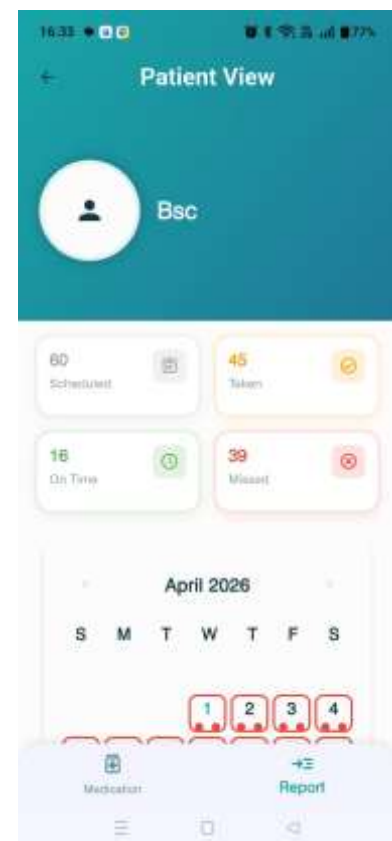

- चुने गए मरीजों की दवा नियमित रूप से लेने और सांस लेने की गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी मासिक कैलेंडर में देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।



बैटरी की अवधि

- इस बैटरी को बदला नहीं जा सकता और यह अधिकतम 600 बार दवा लेने तक चलती है। यही डिवाइस की कुल उपयोगी अवधि है।

सुरक्षा संबंधी सावधानियां

- डिवाइस का इस्तेमाल विस्फोटक पदार्थों के पास न करें।
- डिवाइस का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर न करें, जहां धूल और कंपन का स्तर अधिक हो।
- डिवाइस को गर्म चीजों के पास न रखें।
- डिवाइस को सूखी जगह पर रखें।
- ई-ल्यूपिहेलर में लिथियम बैटरी लगी है। इस्तेमाल के बाद स्थानीय नियमों के अनुसार इसका निपटान करें।

1.1. पर्यावरणीय परिस्थितियां:

तापमान की सीमा: 10°C से 40°C।

सापेक्ष नमी की सीमा: 20% से 90%।

वायुमंडलीय दबाव की सीमा: 600 mBar से 1060 mBar।

यह डिवाइस $\leq 2,000$ मीटर की ऊंचाई तक उपयोग के लिए बनाया गया है।

1.2. स्टोरेज:

तापमान की सीमा: 5°C से 40°C।


सापेक्ष नमी की सीमा: 5% से 95%।

1.3. परिवहन योग्यता।

तापमान की सीमा: 5°C से 40°C।

सापेक्ष नमी की सीमा: 5% से 95%।

उपयोग किए गए चिन्ह

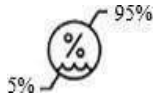	तारीख के साथ दिया गया यह चिन्ह डिवाइस के निर्माण की तारीख दर्शाता है।
	यह चिन्ह उपयोगकर्ता को सही तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी के लिए डिवाइस के निर्देशों को देखने के लिए कहता है।
	यह कानूनी निर्माता (लूपिन लिमिटेड) को दर्शाता है।
	सीरियल नंबर. डिवाइस का सीरियल नंबर सिंबल के साथ होना चाहिए।
	सामान्य चेतावनी संकेत
	बैच कोड
IP21	प्रवेश से सुरक्षा (सुरक्षा स्तर) IP2X: 12.5 mm से अधिक आकार की ठोस वस्तुओं से सुरक्षित। IPX1: ऊपर से सीधे गिरने वाली पानी की बूंदों से सुरक्षित।
	दवा का उपयोग ML में
	बारिश से दूर रखें।
	नाजुक, सावधानी से संभालें।
	तापमान की सीमा
	नमी की सीमा
	पैकेज क्षतिग्रस्त होने पर इस्तेमाल न करें।
	उपयोग की अंतिम तारीख

चेतावनियां

- ई-ल्यूपिहेलर डिवाइस को सावधानी से संभालें। सुनिश्चित करें कि यह गिरे नहीं। गिरने से डिवाइस को नुकसान हो सकता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

- ई-ल्यूपिहेलर डिवाइस को खोलने या उसके हिस्से अलग करने की कोशिश न करें।
- एक ई-ल्यूपिहेलर डिवाइस को केवल एक मोबाइल से जोड़ा जा सकता है।
- बैटरी खत्म हो जाने के बाद उपयोगकर्ता को नया डिवाइस लेना होगा।
- यदि डिवाइस मोबाइल ऐप से कनेक्ट नहीं होता है, तो इसका कारण बैटरी का कम चार्ज होना हो सकता है। बटन दबाने पर अगर नीली और हरी लाइट बारी-बारी से झपकती हैं, तो यह इसी स्थिति को दर्शाता है।

अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं

रेफरेंस स्टैंडर्ड:
IEC 60601-1: मेडिकल डिवाइस: सुरक्षा और आवश्यक परफॉर्मेंस के लिए सामान्य आवश्यकताएं।
IEC 60601-1-2: मेडिकल डिवाइस: कोलैटरल स्टैंडर्ड: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी
IEC 62304: मेडिकल डिवाइस - सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस।
ISO 14971: मेडिकल डिवाइस - मेडिकल डिवाइस पर रिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग।
ISO 13485: मेडिकल डिवाइस - क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम।

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी: IEC 60601-1-2: 2014

इम्युनिटी टेस्ट	IEC 60601 test level	अनुपालन स्तर
इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ईएसडी) IEC 61000-4-2	±8kV (कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज), ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV (एयर डिस्चार्ज)	±8kV (कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज), ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV (एयर डिस्चार्ज)
आरएफ रेडिएटेड इम्युनिटी IEC 61000-4-3	3 V/m (10V/m होम हेल्थकेयर) 80 - 2,700MHz पर, AM मॉड्यूलेशन।	3 V/m (10V/m होम हेल्थकेयर) 80 - 2,700MHz पर, AM मॉड्यूलेशन।
पावर फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड (पीएफएमएफ) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m