



सूचना पुस्तिका



ELUPIHALER
(स्मार्ट ड्राय पावडर इनहेलर)

ल्युपिन लिमिटेड

मुंबई

अनुक्रमणिका

eLupihaler बद्दल	3
eLupihaler तुमच्यासाठी का महत्वाचे आहे?	3
eLupihaler औषधोपचारांचे पालन करणे सुधारण्यास कशी मदत करते?	3
eLupihaler श्वसनाशी संबंधित समस्या सुधारण्यास कशी मदत करते?	3
eLupihaler मधील घटक	4
ELUPIHALER अनबॉक्सिंग	5
मोबाईल ॲप्लिकेशनशी जोडणी करणे	12
डिव्हाइस सुरु करणे.	17
औषधोपचार वेळापत्रक व्यवस्थापन	18
eLupihaler द्वारे औषध कसे घ्यावे?	21
काळजीवाहक समाविष्ट करणे.	27
काळजीवाहूंची कार्यप्रक्रिया	29
बॅटरीचे आयुष्य	34
सुरक्षेबाबतची खबरदारी	34
वापरलेली चिन्हे	35
इशारे	36
महत्वाची सूचना	36

eLupihaler बद्दल

- eLupihaler हे ब्लूटूथ-सक्षम असलेले एक स्मार्ट ड्राय पावडर इनहेलर आहे.
- हे इनहेलर तुम्ही औषध घेण्याची तारीख आणि वेळ, तसेच तुमची औषध घेण्याची पद्धत - म्हणजेच तुम्ही किती खोलवर आणि किती वेळ श्वास आत घेता - याची नोंद करते.
- अँड्रॉइड ओएस (OS) आवृत्ती ७.० व त्यापुढील आणि अँपल आयओएस (iOS) १६.० (आयफोन १२ व त्यापुढील मॉडेल्स) यांच्याशी सुसंगत असलेले एक मोबाइल अँप, तुम्हाला पडताळणीसाठी रेकॉर्डिंग तुमच्या स्मार्टफोनवर हस्तांतरित करण्याची सुविधा देते. तुमची काळजी घेणारी व्यक्ती आणि डॉक्टर यांनाही त्या माहितीचे मूल्यांकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
- कार्य सुरू असताना उपकरणावर दोन LED द्वारे दृश्य संकेत दिले जातात. हे तुम्हाला श्वास घेण्याच्या योग्य क्रमानुसार मार्गदर्शन करतात.
- eLupihaler मोबाइल अँपच्या मदतीने, डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे औषध घेण्यासाठी तुम्हाला दररोज डोसचे रिमाइंडर्स मिळू शकतात.
- तुमच्या सध्याच्या स्थानावर आधारित, हवेच्या गुणवत्तेचा निर्देशांक (AQI), वाऱ्याचा वेग आणि तापमान यांविषयीची अद्ययावत माहिती (रिअल-टाइम अपडेट्स) मोबाइल अँपवर दर्शविली जाते; यामुळे तुम्हाला आपत्कालीन औषधांसह सज्ज राहण्यास मदत होऊ शकते.
- हे मोबाइल अँप दैनंदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक आधारावर वापराचा संपूर्ण अहवाल प्रदान करते, ज्यामुळे तुम्हाला तुमच्या DPI वापराचा मागोवा घेता येतो.

eLupihaler तुमच्यासाठी का महत्वाचे आहे?

- eLupihaler मुळे उपचारांमध्ये सातत्य राखणे सोपे जाते आणि तुम्हाला वेळेवर आराम मिळतो.
- उपचारांचे अधिक चांगल्या प्रकारे पालन केल्याने आजार बळावण्यापासून रोखता येते आणि तुमच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासही मदत होऊ शकते.


eLupihaler औषधोपचारांचे पालन करणे सुधारण्यास कशी मदत करते?

- eLupihaler अँप तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितलेल्या डोसच्या वारंवारतेनुसार (उदा. दिवसातून एकदा किंवा दोनदा इ.) वेळेवर DPI घेण्याबाबत रिमाइंडर/नोटिफिकेशन देते.
- eLupihaler अँप तुमच्या सध्याच्या DPI उपकरणातून वापरलेल्या डोसची संख्या दर्शवते.

eLupihaler श्वसनाशी संबंधित समस्या सुधारण्यास कशी मदत करते?

- श्वास घेण्याशी संबंधित माहिती (इनहेलेशन डेटा) संकलित व साठवली जाते आणि त्यानंतर श्वास घेण्याच्या पद्धतीचा दर्जा मोजण्यासाठी ती मोबाइल अँपवर हस्तांतरित केली जाते. कलर कोड, वर्णनात्मक मजकूर आणि आलेखांच्या माध्यमातून, मोबाइल अँप्लिकेशन वापरकर्त्याला श्वास घेण्याचे तंत्र समजून घेण्यासाठी व त्यात सुधारणा करण्यासाठी अहवाल तयार करते, ज्यामुळे औषधाची परिणामकारकता संभाव्यतः सुधारते.

eLupihaler मधील घटक

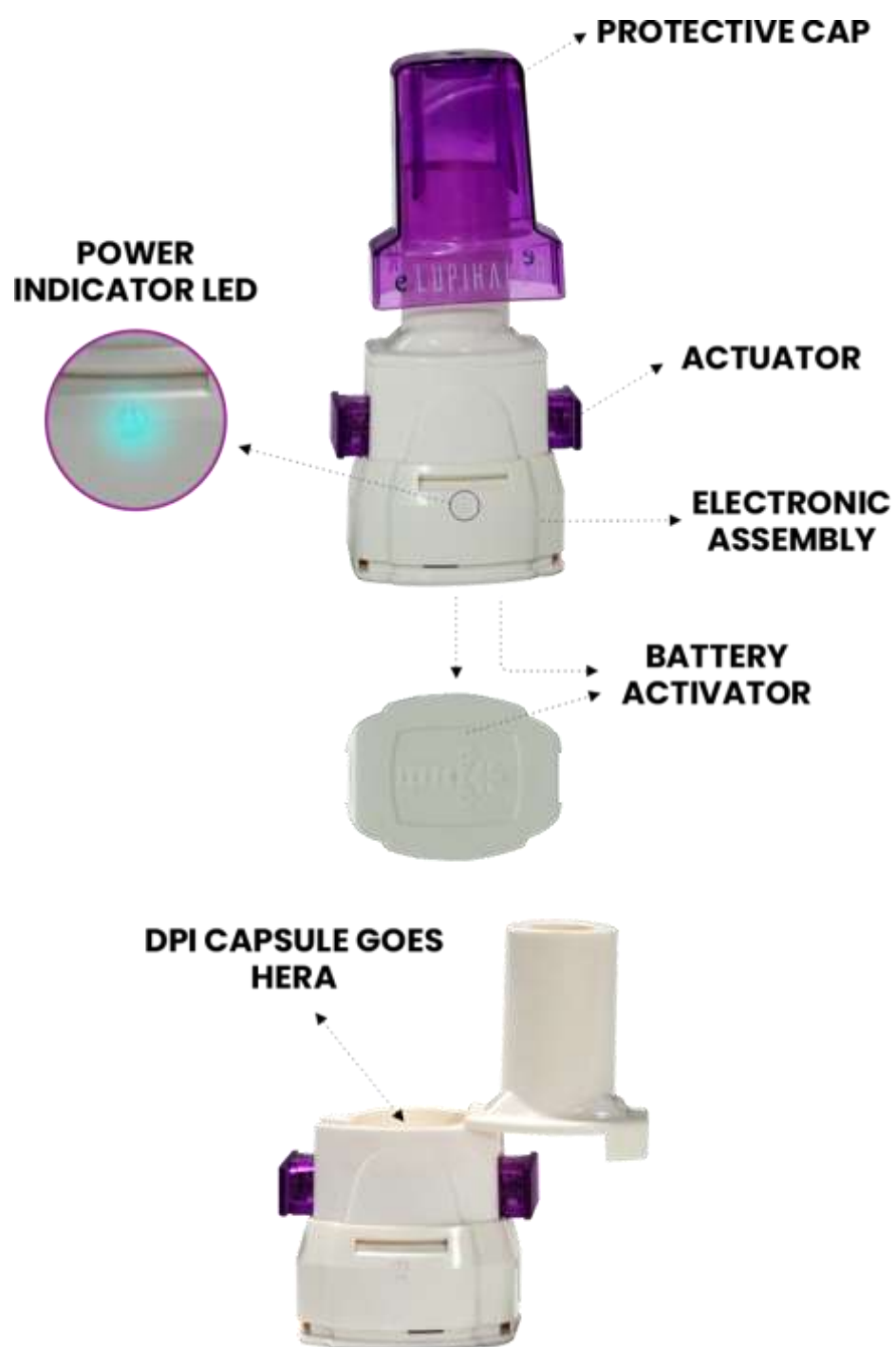

ELUPIHALER अनबॉक्सिंग

- बॉक्स सरळ धरा आणि मधून डिव्हाइस काळजीपूर्वक बाहेर काढा.



- eLupihaler ॲप डाउनलोड करण्यासाठी डाव्या बाजूचा QR कोड स्कॅन करा.




eLupihaler सेटअप

- eLupihaler ची 'वेलकम स्क्रीन' पहिल्यांदा सुरु होण्यासाठी काही सेकंद घेते.



- डेटाची देवाणघेवाण करण्यासाठी डिव्हाइसला ब्लूटूथ परवानग्यांची आवश्यकता असल्याने 'सुरु ठेवा' या बटणावर क्लिक करा.
- तुमच्या सध्याच्या ठिकाणची हवेच्या गुणवत्तेची अचूक माहिती देण्यासाठी 'लोकेशन अॅक्सेस' आवश्यक आहे.

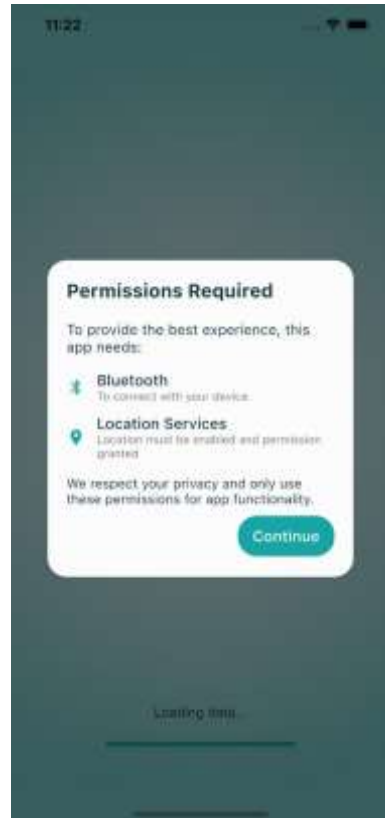

- सर्व सूचना वाचल्यानंतर कृपया मला समजले आहे आणि पुढे जा या बटणावर क्लिक करा.




- कृपया तुमचा मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा आणि अटी व शर्ती वाचून व त्या मान्य करून चेकबॉक्सवर क्लिक करा.



- SMS द्वारे प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा आणि 'सबमिट' बटणावर क्लिक करा; किंवा OTP न मिळाल्यास (६० सेकंदांच्या काऊंटडाऊननंतर) 'OTP पुन्हा पाठवा' याची विनंती करा.




- ॲप्लिकेशनचा भविष्यात वापर करण्यासाठी आणि अनधिकृत वापरापासून त्याचे संरक्षण करण्यासाठी, तुम्ही ४-अंकी MPIN सेट करू शकता किंवा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सुरू करू शकता.

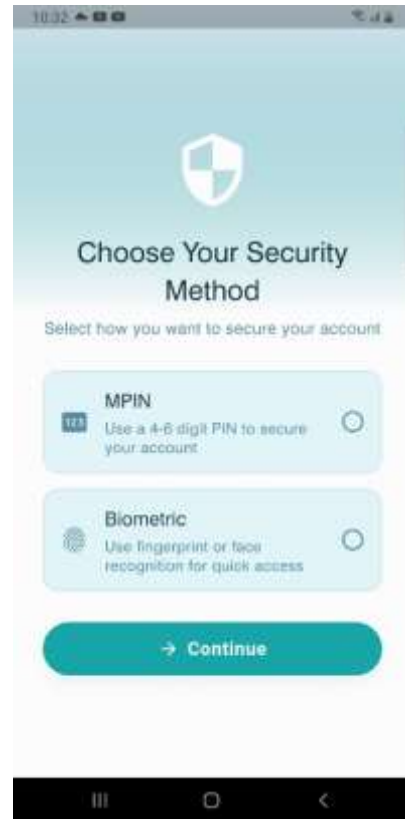

- जर तुम्ही MPIN हा पर्याय निवडला असेल, तर ४-अंकी MPIN सेट करा आणि त्याची पुष्टी करा.




- eLupihaler साठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाचा (जे डिव्हाइसच्या स्तरावर कॉन्फिगर केले आहे) वापर करण्यास पुष्टी किंवा अधिकृतता द्या.

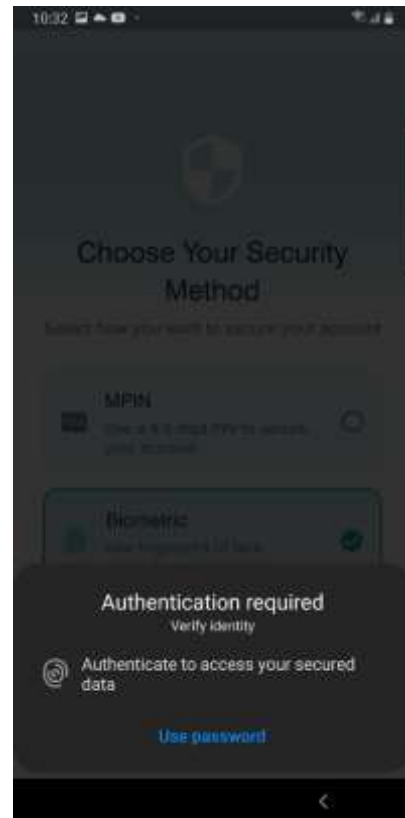


- कृपया रुग्ण किंवा काळजी घेणारी व्यक्ती (केअरगिव्हर) यापैकी तुमची भूमिका निवडा.
- रुग्ण भूमिकेसाठी, पुढे जाण्याकरिता > बटणावर क्लिक करा.
- काळजी घेणाऱ्या व्यक्तीच्या भूमिकेसाठी केअरगिव्हर फ्लो हा विभाग पहा.



- कृपया तुमची निवड निश्चित करा.

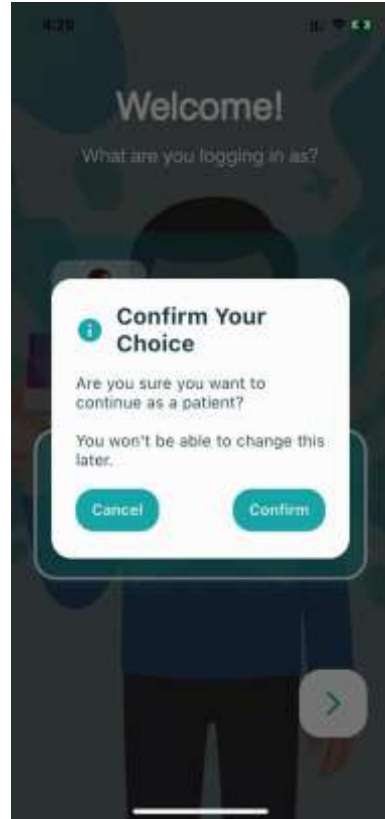

- तुमच्या प्रोफाईलची मूलभूत माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी 'सुरु ठेवा' (> बटण) वर क्लिक करा.

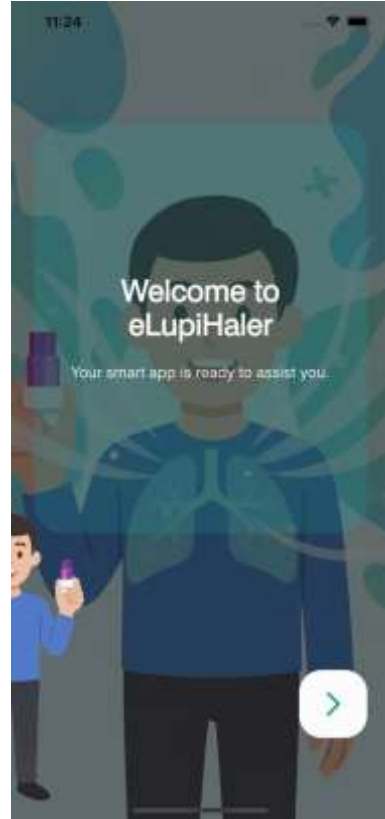

- कृपया नाव, लिंग इत्यादी मूलभूत तपशील भरून तुमचे प्रोफाईल पूर्ण करा.

11:24

Welcome to eLupiHaler

Your smart app is ready to assist you.

11:15

Patient Details

Please enter your basic details

Enter your full name

Select your gender

Male ♂ Female ♀

Date of Birth

Fri, Feb 22, 2008

Feet Inches

Weight

Next

मोबाईल ॲप्लिकेशनशी जोडणी करणे

पुढील स्क्रीन तुम्हाला 'eLupihaler' पहिल्यांदाच मोबाईल ॲप्लिकेशनशी जोडण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.

- खोके उभे धरा आणि वरच्या बाजूने उपकरण काळजीपूर्वक बाहेर काढा.



- बदाखवल्याप्रमाणे इनहेलर काळजीपूर्वक धरून ट्रेमधून बाहेर काढा.



- हे उपकरण वापरताना, पॉवर-इंडिकेटर LED तुमच्या दिशेने राहिल अशा प्रकारे इनहेलर धरा.




- डिव्हाइसची बॅटरी बसवा – डिव्हाइस तिरपे धरा आणि बटणाचे कव्हर हळूच दाबा, जोपर्यंत ते मुख्य डिव्हाइसवर घट्टपणे 'क्लिक' होत नाही.




- एकदा का डिवाइस चालू झाले की, ते पेअर (pair) होईपर्यंत निळा LED दर २ सेकंदांनी लुकलुकत राहतो.




- Connect Device' वर क्लिक करून ब्लूटूथद्वारे डिवाइसशी कनेक्ट करण्याची वेळ आली आहे.

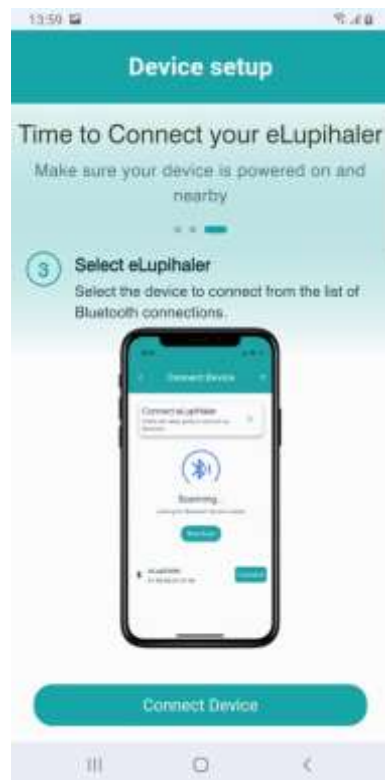


- eLupihaler उपकरणांचा शोध घेण्यासाठी Scan for Devices वर क्लिक करा.

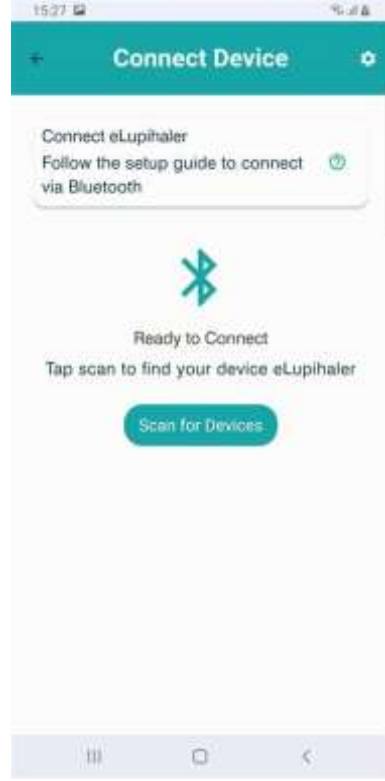

- त्या डिव्हाइसशी कनेक्ट/पेअर करण्यासाठी, स्कॅन केलेल्या eLupihaler डिव्हाइसेसच्या यादीतील संबंधित डिव्हाइसवर क्लिक करा.
- जर तुमचे डिव्हाइस यादीत नसेल, तर त्यावर निळा प्रकाश लुकलुकत आहे का ते तपासा. जर तुम्हाला कोणतेही निळे दिवे दिसत नसतील, तर कृपया डिव्हाइस चालू करणे (Turning on the device) हा विभाग पहा.

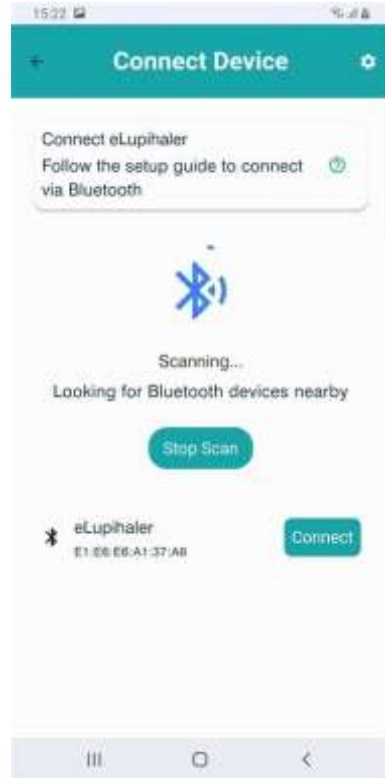

- डिव्हाइस यशस्वीरित्या पेअर झाल्यावर, तुम्हाला स्क्रीनवर पुष्टीकरण मिळेल ज्यामध्ये डिव्हाइसशी संबंधित सर्व तपशील दर्शविले जातील.
- डिव्हाइसचे सेटअप आता पूर्ण झाले आहे आणि तुम्ही तुमच्या औषधांचे वेळापत्रक व्यवस्थापित करण्यास सज्ज आहात.

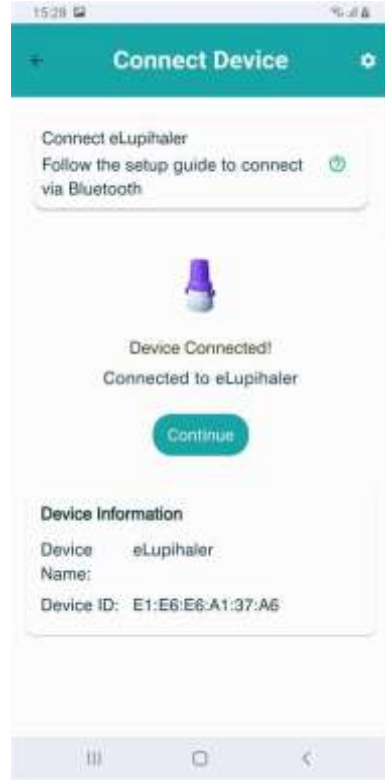


डिव्हाइस सुरु करणे.

जर तुम्ही सुरुवातीच्या सेटअप प्रक्रियेदरम्यान डिव्हाइस मोबाइल ॲप्लिकेशनशी जोडू शकला नसाल, तर पुढील स्क्रीन्स तुम्हाला ते जोडण्यासाठी मार्गदर्शन करतील.

- स्कॅन करताना, जर ॲप्लिकेशनला कोणतेही eLupihaler उपकरण आढळले नाही, तर पुन्हा स्कॅन करण्यापूर्वी ⁽ⁱ⁾ त्या चिन्हावर क्लिक करा.



- ही प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी तुम्हाला मदत स्क्रीन पॉप-अप मिळेल.

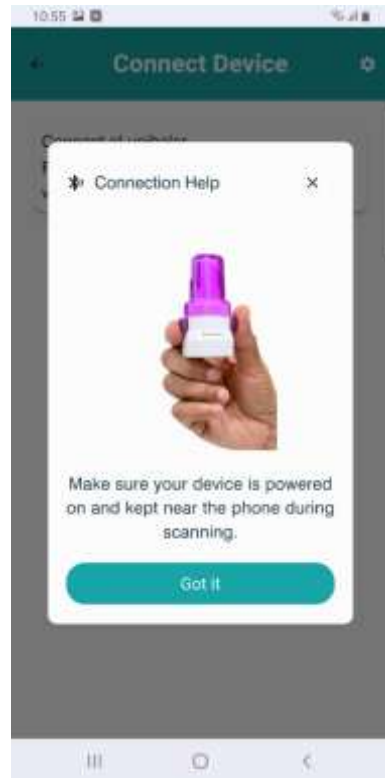

औषधोपचार वेळापत्रक व्यवस्थापन


तुम्ही डॉक्टरांच्या चिठ्ठीनुसार औषधे आणि त्यांचे वेळापत्रक यात भर घालू शकाल किंवा बदल करू शकाल.

औषध घाला.

- तुमची औषधे घालण्यास सुरुवात करा.



- तुम्ही विशिष्ट औषध शोधू शकता आणि यादीतील औषधांच्या शेजारील '>' बटणावर क्लिक करून त्या औषधांबद्दलची अतिरिक्त माहिती पाहू शकता.

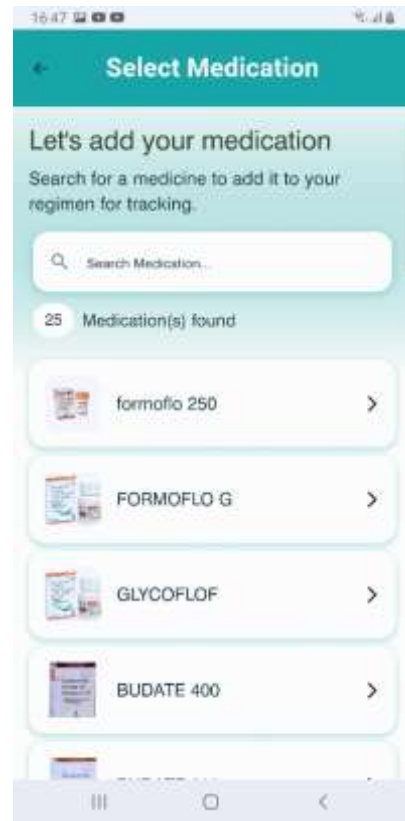


- तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि औषधाच्या मात्रेच्या माहितीसह सकाळ, दुपार किंवा संध्याकाळची वेळ निवडू शकता.




- तुमच्या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शननुसार आणखी औषधे समाविष्ट करायची असल्यास 'Add DPI' वर क्लिक करा.
- जर तुम्ही तुमचे औषधांचे प्रोफाईल पूर्ण केले असेल, तर 'नाही, माझ्याकडे दुसरे कोणतेही DPI नाही' वर क्लिक करा.



- औषधांच्या वेळापत्रकानुसार सूचना किंवा स्मरणपत्रे मिळवण्यासाठी तुम्ही ॲपमध्ये रिमाइंडर्स देखील सेट करू शकता.

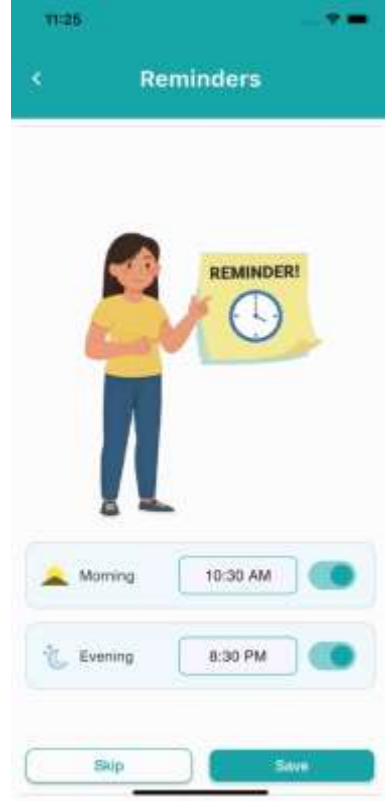

- तुमच्या प्रोफाईलमध्ये सर्व औषधे सेव्ह केल्यानंतर, 'Let's Go' वर क्लिक करा.

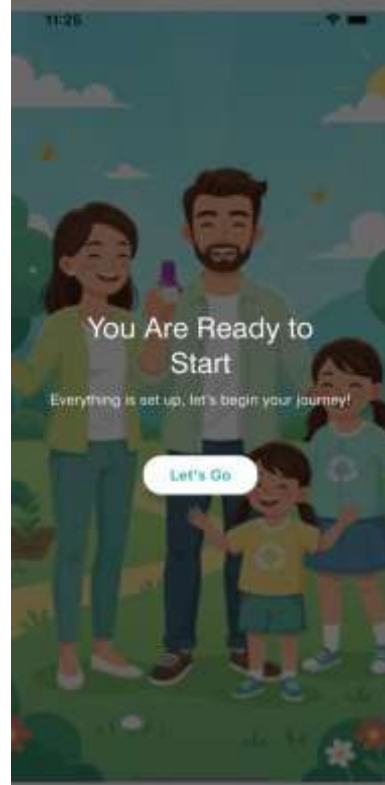

eLupihaler द्वारे औषध कसे घ्यावे?

डिव्हाइसशी यशस्वीपणे जोडणी केल्यानंतर, खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करून तुम्ही मोबाइल ॲप्लिकेशनसह किंवा त्याशिवाय इनहेलर वापरू शकता.

- इनहेलरवरील संरक्षक झाकण काढा आणि इनहेलर अशा प्रकारे धरा की पॉवर इंडिकेटर किंवा LED तुमच्या दिशेने असेल.



- इनहेलरचा तळ घट्ट पकडा आणि बाणांच्या दिशेने माउथपीस फिरवून इनहेलर उघडा.



- एक कॅप्सूल घ्या आणि ती इनहेलरच्या कॅप्सूल चेंबरमध्ये ठेवा.
- कॅप्सूल पूर्णपणे कॅप्सूल चेंबरच्या आत आहे का, ते तपासा.
- नसल्यास, कॅप्सूल योग्य प्रकारे ठेवा.




- माउथपीस परत बंद स्थितीत फिरवून इनहेलर बंद करा.




- इनहेलर सरळ (माउथपीस वरच्या दिशेला राहील अशा प्रकारे) धरा आणि पुश बटणे अंगठा व तर्जनीच्या मध्ये धरा. इनहेलर अशा प्रकारे धरा की, पॉवर इंडिकेटर किंवा LED तुमच्या दिशेने असेल.
- या बटणांवर एकदाच दाब देण्यासाठी दोन्ही बोटांचा एकाच वेळी वापर करा आणि जलद व ठाम दाब द्या. कॅप्सूल आता सर्व बाजूंनी समान रीतीने टोचली गेली आहे.




- डिव्हाइसवरील दोन्ही LEDs हळूवारपणे लुकलुकू लागतात. या टप्प्यावर, जर तुमच्याकडे मोबाईल फोन उपलब्ध असेल, तर श्वास घेण्याच्या क्रियेचा रिअल-टाइम मागोवा घेण्यासाठी तुम्ही डिव्हाइस स्कॅन करून ते पेअर करू शकता.
- ही फुफ्फुसे रिकामी करून श्वास आत घेण्याची तयारी करण्याची सूचना आहे.
- हे उपकरण तुमच्या तोंडापासून थोडे दूर धरा आणि LED लुकलुकताना पाहून हळूच श्वास पूर्ण बाहेर सोडा.

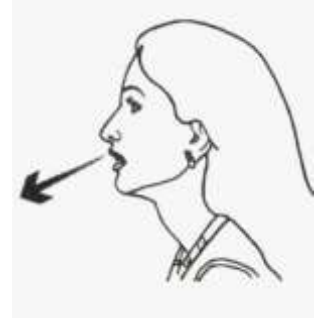

- फुफ्फुसांमधील हवा पूर्णपणे बाहेर टाकल्यानंतर, इनहेलर आपल्या तोंडाजवळ आणा आणि तो आडवा धरा.
- तुमचे डोके थोडे मागे झुकवा.
- इनहेलरचे माउथपीस (तोंडात धरायचा भाग) पूर्णपणे तुमच्या तोंडात, दातांच्या मागे आणि जिभेवर ठेवा.
- माउथपीसभोवती तुमचे ओठ घट्ट मिटून धरा.
- शक्य तितक्या खोलवर, वेगाने पण स्थिरपणे श्वास घ्या.
- जर इनहेलर योग्यरित्या काम करत असेल, तर त्यातून खडखडण्याचा आवाज येतो; कारण पावडर पसरवण्यासाठी त्यातील चेंबरमध्ये कॅप्सूल फिरत असते.

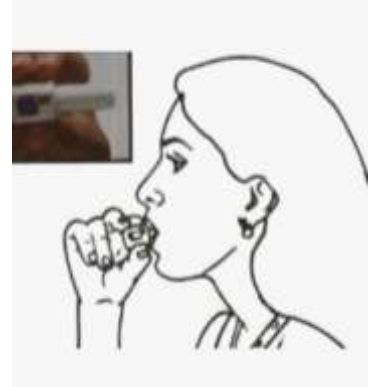

- तुमच्या तोंडातून इनहेलर बाहेर काढा. तुमचा श्वास सुमारे ५-१० सेकंद रोखून धरा, जेणेकरून तुमची फुफ्फुसे औषध शोषून घेऊ शकतील. त्यानंतर हळूच श्वास बाहेर सोडा. इनहेलर उघडा आणि कॅप्सूल रिकामी आहे का ते तपासा; नसल्यास, पुन्हा श्वास आत घ्या.

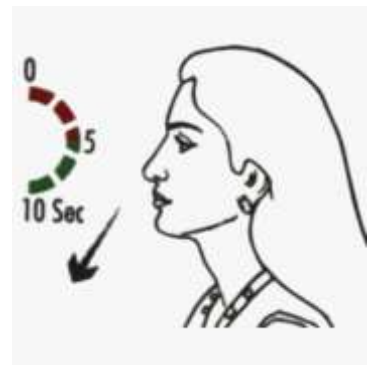

- श्वास आत घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याने चूळ भरा; ते पाणी गिळू नका. इनहेलर उघडा आणि रिकामी कॅप्सूल काढून टाका. इनहेलरवर संरक्षक झाकण परत लावा.



- डेटा सिंक करत आहे:
 - तुमच्या मोबाईलवरील eLupihaler ॲप्लिकेशनशी जोडले गेल्यावर, इनहेलर आपोआप डेटा सिंक्रोनाइझ करते.
- इनहेलर स्वच्छ करणे:
 - तुमच्या eLupihaler चा कोणताही भाग पाण्याने धुवू नका किंवा पाण्यात टाकू नका. eLupihaler मध्ये पावडर असते, त्यामुळे ते नेहमी स्वच्छ आणि कोरडे ठेवणे आवश्यक आहे.
 - जर माउथपीस स्वच्छ करण्याची गरज असेल, तर तो कोरड्या कापडाने किंवा टिश्यूने हलक्या हाताने पुसा.



श्वसनाद्वारे होणाऱ्या संपर्काबाबतच्या अहवालांचे अवलोकन

उपकरणाद्वारे गोळा केलेली तुमची श्वास घेण्यासंबंधीची माहिती मोबाइल ॲप्लिकेशनमध्ये साठवली जाते आणि ॲप्लिकेशनच्या विविध विभागांमध्ये प्रदर्शित केली जाते. या सूचना तुम्हाला अहवाल शोधण्यास, पाहण्यास आणि तयार करण्यास मदत करतील; हे अहवाल इतरांसोबत PDF स्वरूपात शेअर केले जाऊ शकतात.


- तुमच्या होम स्क्रीनवर, औषध घेण्याच्या नियमिततेचा इतिहास अनेक विभागांमध्ये दर्शविला जातो.
- अंमलबजावणीची स्थिती संख्यात्मक तपशीलासह आलेखाच्या (इंधन दर्शकासारख्या) स्वरूपात दर्शविली जाते.




- पालनाचे प्रमाण कॅलेंडर स्वरूपातही पाहता येते, ज्यामध्ये चुकलेले, वेळेवर आणि आगामी असे निर्देशक असतात.



- रिपोर्ट या बटणावर क्लिक केल्यावर  औषधांचा इतिहास सूचीबद्ध होतो.
- श्वसनाशी संबंधित माहितीचा तपशील पाहण्यासाठी तुम्ही स्वतंत्र रिपोर्ट या बटणावर क्लिक करू शकता.

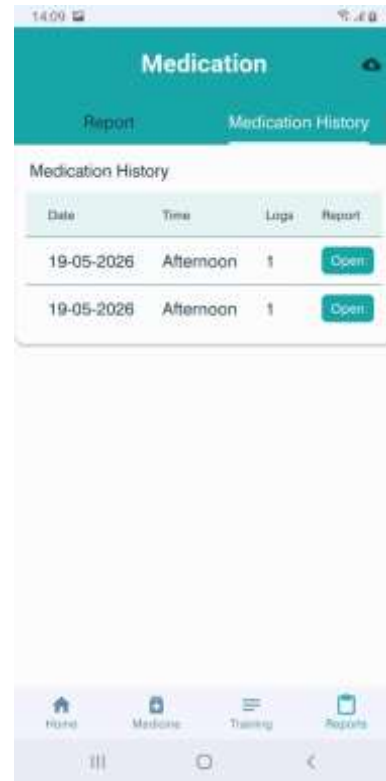

- श्वसनविषयक माहिती फ्लो रेट विरुद्ध वेळ अशा आलेखाच्या स्वरूपात दर्शविली जाते; यामुळे तुम्हाला तुमच्या श्वास घेण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण करून तिची शिफारस केलेल्या पद्धतीशी तुलना करण्यास मदत होते.
- हा अहवाल फ्लो रेट, कालावधी आणि एकूण निकालाचे गुणात्मक मूल्यमापन दर्शवतो, तसेच कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी काही सूचना देतो.

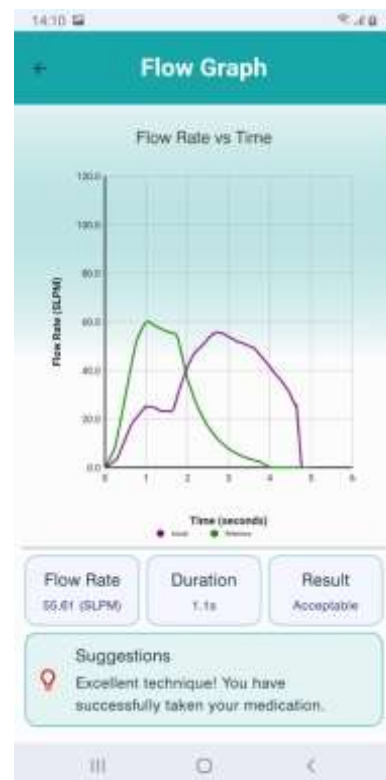

दिनचर्या संपादित करा.

- औषधोपचारांचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी, तुमच्या प्रोफाईलमधील औषधावर क्लिक करा.

टीप: जर तुम्ही एखादे नवीन औषध समाविष्ट करत असाल, तर औषध घालण्याची प्रक्रिया पहा.




- सकाळ, 'दुपार' किंवा 'संध्याकाळ' यांवर क्लिक करून तुम्ही वेळापत्रकात बदल करू शकता.
- तुम्ही प्रत्येक वेळापत्रकासाठी डोसचे प्रमाण (एक किंवा अनेक डोस) देखील निश्चित करू शकता.




काळजीवाहक समाविष्ट करणे.

हे ॲप्लिकेशन तुम्हाला तुमच्या प्रोफाईलमध्ये **काळजीवाहक** म्हणून एखादा केअर प्रोव्हायडर किंवा कुटुंबातील सदस्य जोडण्याची सुविधा देते. त्यांना जोडण्यासाठी फक्त या पायऱ्यांचे अनुसरण करा. तुमच्या आरोग्याला पूरक ठरेल अशा प्रकारे ते तुमच्या औषधोपचारांच्या नोंदींवर किंवा इतिहासावर लक्ष ठेवू शकतील.


- होम स्क्रीनच्या तळाशी तुम्हाला काळजीवाहक विभाग आढळेल. काळजीवाहकाला समाविष्ट करण्यासाठी कृपया 'Add a caregiver' या बटणावर क्लिक करा.

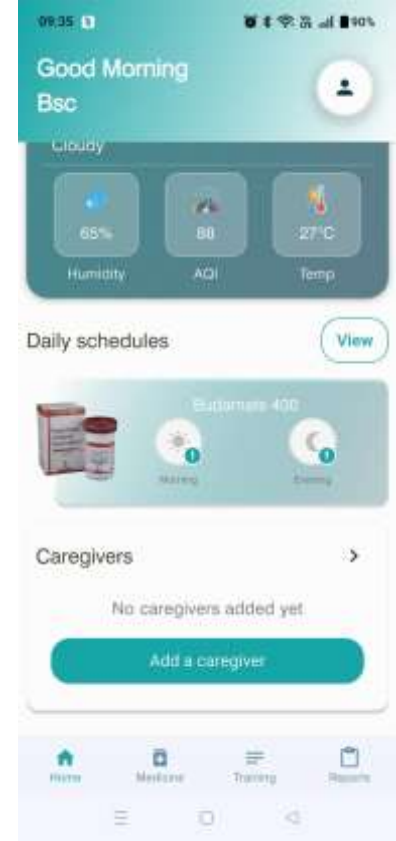

- विनंती सुरु करण्यासाठी तुम्हाला काळजीवाहकाचा मोबाईल क्रमांक देण्यास सांगितले जाईल.

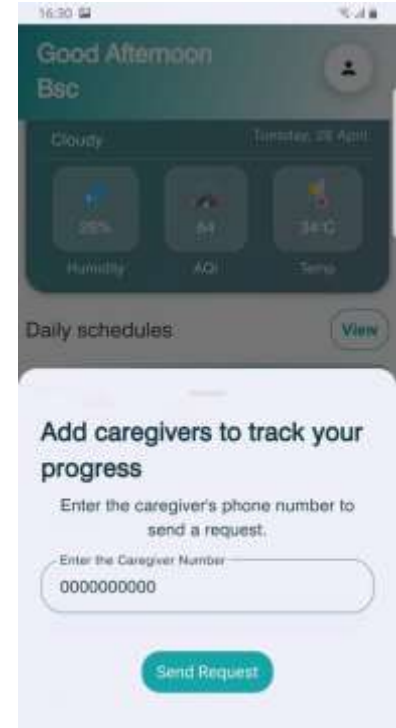

- तुम्ही काळजीवाहक विभागात विनंतीची स्थिती पाहू शकाल.

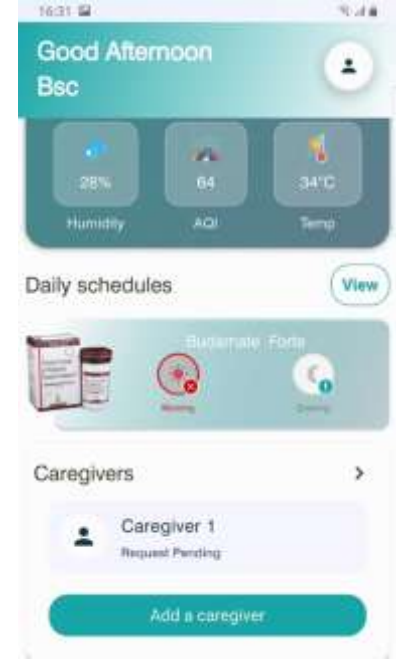


- विनंती यशस्वीरीत्या मंजूर झाल्यानंतर, तुम्हाला केअरगिव्हरचा तपशील दिसेल.
- तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार एक किंवा अधिक काळजीवाहक समाविष्ट करू शकता.
- डिलीट बटणावर क्लिक करून तुम्ही एखाद्या विशिष्ट काळजीवाहकाला काढून टाकू शकता किंवा त्यांचा संबंध तोडू शकता.




काळजीवाहूंची कार्यप्रक्रिया

जर तुम्ही ऑनबोर्डिंगदरम्यान काळजीवाहकाची ही भूमिका निवडली असेल, तर या प्रक्रियेचा प्रवाह समजून घेण्यासाठी खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा.


- कृपया रुग्ण किंवा काळजी घेणारी व्यक्ती (केअरगिव्हर) यापैकी तुमची भूमिका निवडा.
- काळजीवाहकाच्या भूमिकेसाठी, केअरगिव्हर फ्लो विभागाचा संदर्भ घ्या.

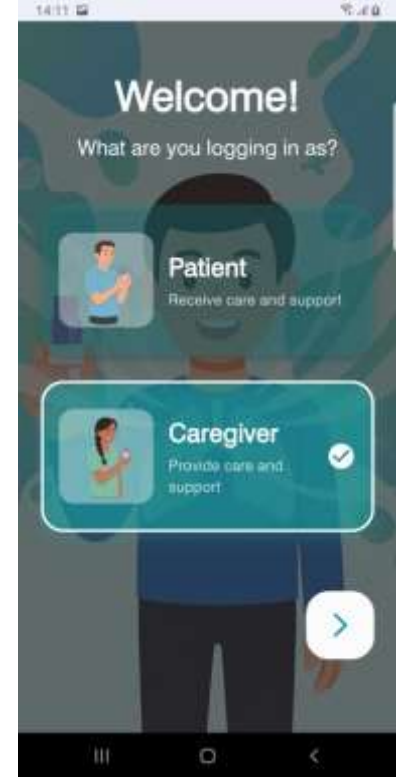

- काळजीवाहक म्हणून तुमची निवड निश्चित करा.

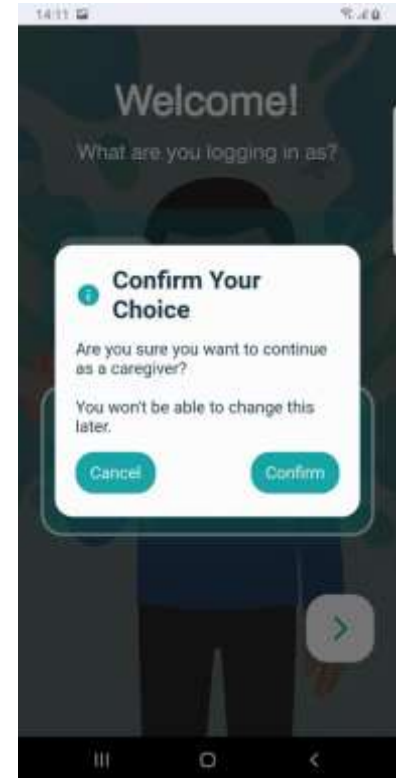


- तुमच्या प्रोफाईलची मूलभूत माहिती व्यवस्थापित करण्यासाठी 'सुरु ठेवा' (> बटण) वर क्लिक करा.

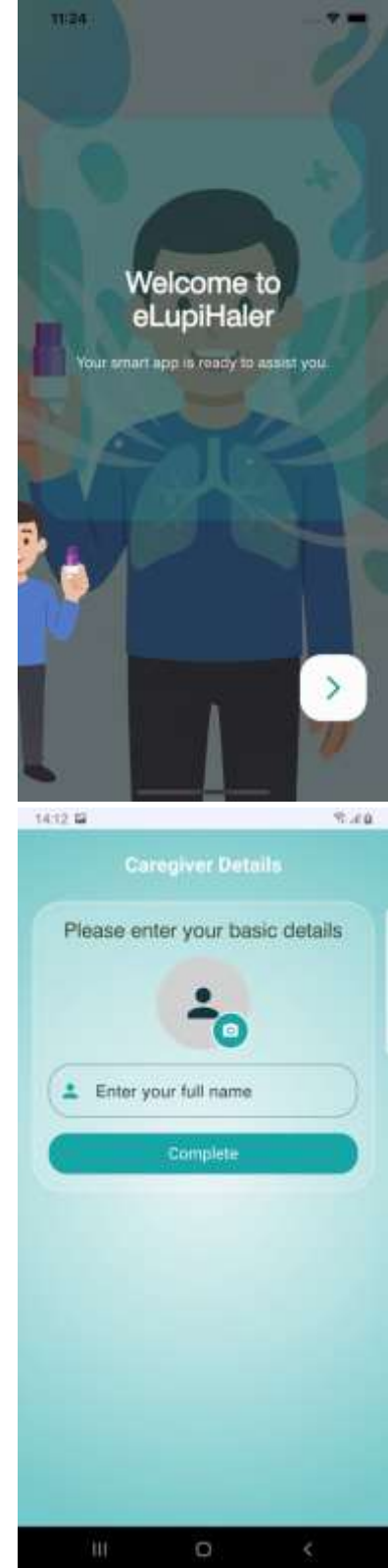

- कृपया तुमचे नाव देऊन तुमचे प्रोफाईल पूर्ण करा.

- काळजीवाहक म्हणून यशस्वी नोंदणी केल्यानंतर, तुम्हाला अशा व्यक्तींची यादी दर्शवणाऱ्या स्क्रीनवर नेले जाईल ज्यांनी तुम्हाला 'काळजीवाहक' म्हणून नियुक्त केले आहे.
- तुम्ही वैयक्तिक विनंत्या मंजूर किंवा नाकारू शकता.

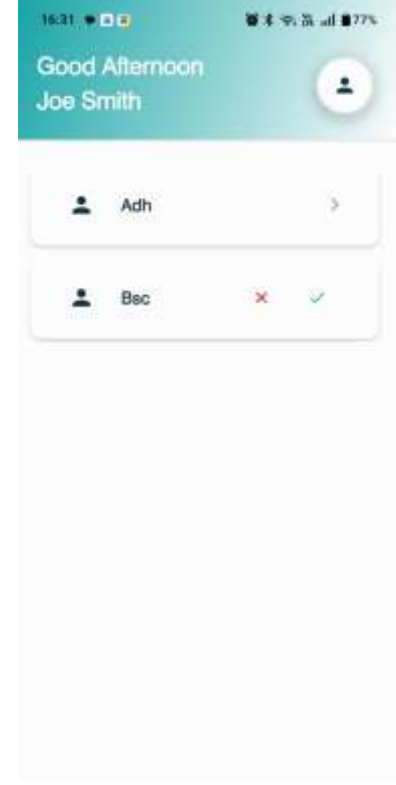


- मंजुरी मिळाल्यानंतर, '>' बटणावर क्लिक करून तुम्ही निवडलेल्या व्यक्तींची औषधे आणि औषधोपचारांच्या इतिहासाचा तपशील पाहू शकाल.



- रुग्णाच्या नोंदीवर क्लिक केल्यावर, तुम्हाला 'पेशंट व्ह्यू' वर नेले जाईल.



- रुग्णाशी संबंधित काही आकडेवारी पाहण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.

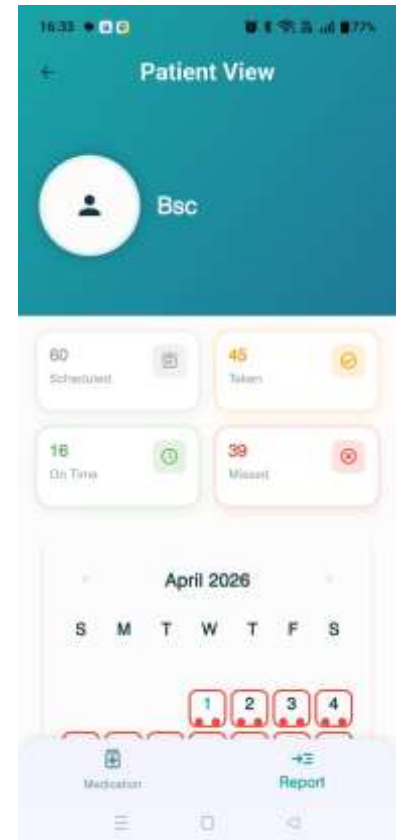

- निवडलेल्या रुग्णांसाठी, औषधोपचारांचे पालन आणि श्वासाद्वारे औषध घेण्याच्या पद्धतीचा दर्जा यांविषयीची माहिती मासिक कॅलेंडर स्वरूपात पाहण्यासाठी खाली स्क्रोल करा.



बॅटरीचे आयुष्य

- यात असलेली न बदलता येण्याजोगी बॅटरी जास्तीत जास्त ६०० 'पफ्स'पर्यंत (puffs) साथ देते, जे या उपकरणाचे एकूण उपयुक्त आयुष्य दर्शवते.

सुरक्षेबाबतची खबरदारी

- हे उपकरण स्फोटक पदार्थांजवळ वापरू नका.
- अति धूळ आणि कंपने असलेल्या वातावरणात हे उपकरण वापरू नका.
- युनिट्स उष्णतेच्या स्रोतांजवळ ठेवू नका.
- हे उपकरण कोरड्या जागी ठेवा.
- eLupihaler मध्ये लिथियम बॅटरी असते आणि वापरानंतर तिची विल्हेवाट स्थानिक नियमांनुसार लावली पाहिजे.

1.1. पर्यावरणीय परिस्थिती:

तापमानाची श्रेणी: १०°से ते ४०°से.

सापेक्ष आर्द्रतेची श्रेणी: २०% ते ९०%.

वातावरणीय दाबाची श्रेणी: ६०० mBar ते १०६० mBar.

हे उपकरण २,००० मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी उंचीवर चालण्यासाठी बनवलेले आहे.

1.2. साठवणूक:

तापमानाची श्रेणी: ५°से ते ४०°से.

सापेक्ष आर्द्रतेची श्रेणी: ५% ते ९५%.

1.3. वाहतूकक्षमता

तापमानाची श्रेणी: ५°से ते ४०°से.

सापेक्ष आर्द्रतेची श्रेणी: ५% ते ९५%.

वापरलेली चिन्हे

	तारखेसह असलेले हे चिन्ह उपकरणाची निर्मिती तारीख दर्शवते.
	हे चिन्ह वापरकर्त्याला उपकरणाच्या योग्य वापराबाबतच्या माहितीसाठी त्यातील सूचना पाहण्याची सूचना देते.
	याचा संदर्भ कायदेशीर उत्पादक (ल्युपिन लिमिटेड) असा आहे.
	अनुक्रमांक. उपकरणाचा अनुक्रमांक त्या चिन्हासोबत असावा.
	सामान्य धोक्याची सूचना देणारे चिन्ह
	बॅच कोड
IP21	प्रवेश संरक्षण IP2X: १२.५ मिमी IPX1 पेक्षा मोठ्या घन वस्तूपासून संरक्षण : उभ्या दिशेने पडणाऱ्या पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षित
	औषधे मिलीमध्ये
	पावसापासून दूर ठेवा.
	नाजूक असल्याने काळजीपूर्वक हाताळा
	तापमान मर्यादा 10°C - 40°C
	आर्द्रतेची मर्यादा 5% - 95%
	पॅकेज खराब झाले असल्यास वापरू नका.
	वापरण्याची अंतिम तारीख

इशारे

- eLupihaler हे उपकरण काळजीपूर्वक हाताळा. ते पडणार नाही याची खात्री करा. खाली पडल्याने उपकरणाचे नुकसान होऊ शकते.

महत्वाची सूचना

- eLupihaler हे उपकरण उघडण्याचा किंवा त्याचे भाग वेगळे करण्याचा प्रयत्न करू नका.
- एक eLupihaler उपकरण केवळ एकाच मोबाईलशी जोडले जाऊ शकते.
- बॅटरी संपल्यानंतर वापरकर्त्याला नवीन डिव्हाइस घ्यावे लागेल.
- जर डिव्हाइस मोबाइल फोन ॲपशी कनेक्ट होत नसेल, तर त्याचे कारण बॅटरीची पातळी कमी असणे हे असू शकते. बटणे दाबल्यावर निळे आणि हिरवे दिवे आळीपाळीने लुकलुकत असल्यास, ही स्थिती दर्शविली जाते.

अनुपालनाची आवश्यकता

संदर्भ मानके:
IEC ६०६०१-१: वैद्यकीय उपकरणे: सुरक्षा आणि अत्यावश्यक कार्यक्षमतेसाठीच्या सामान्य आवश्यकता.
IEC 60601-1-2: वैद्यकीय उपकरणे: दुय्यम मानक: विद्युतचुंबकीय सुसंगतता.
IEC 62304: वैद्यकीय उपकरणे - सॉफ्टवेअर जीवनचक्र प्रक्रिया.
ISO १४९७१: वैद्यकीय उपकरणे - वैद्यकीय उपकरणांसाठी जोखीम व्यवस्थापनाचा वापर.
ISO 13485: वैद्यकीय उपकरणे - गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली.

विद्युतचुंबकीय सुसंगतता: IEC 60601-1-2: 2014

रोगप्रतिकारशक्ती चाचणी	IEC ६०६०१ चाचणी पातळी	अनुपालन पातळी
स्थिर विद्युत विसर्जन (ESD) IEC ६१०००-४-२	±8kV (संपर्क विसर्जन), ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV (वायु विसर्जन)	±8kV (संपर्क विसर्जन), ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV (वायु विसर्जन)
RF रेडिएटेड इम्युनिटी IEC ६१०००-४-३	३ V/m (घरगुती आरोग्यसेवेसाठी १० V/m), ८० - २,७०० MHz श्रेणीमध्ये, AM मॉड्युलेशन.	३ V/m (घरगुती आरोग्यसेवेसाठी १० V/m), ८० - २,७०० MHz श्रेणीमध्ये, AM मॉड्युलेशन.
पॉवर फ्रिक्वेन्सी चुंबकीय क्षेत्र (PFMF) IEC ६१०००-४-८	३० A/m	३० A/m