



ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପୁସ୍ତିକା



ELUPIHALER
(ସ୍ନାଚ ଶୁଷ୍କ ପାଉଡର ଇନ୍‌ହେଲର୍)

ଲୁପିନ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ମୁମ୍ବାଇ

ବିଷୟସୂଚୀ

eLupihaler ବିଷୟରେ	3
eLupihaler ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?	3
eLupihaler କିପରି ଔଷଧ ସେବନ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ?	3
eLupihaler କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ?	3
eLupihaler-ର ଉପାଦାନ	4
ELUPIHALER ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନ	5
eLupihaler ସେଟଅପ୍	6
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ।	12
ଡିଭାଇସକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା	17
ଔଷଧ ସୂଚୀ ପରିଚାଳନା	18
eLupihaler ସହିତ ଔଷଧ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ	21
ଜଣେ ଯତ୍ନଦାତା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି	27
ଯତ୍ନବାନ ପ୍ରବାହ	29
ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ	34
ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା	34
ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ	35
ସତର୍କତା	36
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା	36

eLupihaler ବିଷୟରେ

- eLupihaler ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧାଯୁକ୍ତ 'ଡ୍ରାଏ ପାଉଡର ଇନହେଲର୍'।
- ଏହି ଇନହେଲର୍ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ସେବନର ତାରିଖ ଓ ସମୟ ସହିତ ଔଷଧ ନେବାର ପଦ୍ଧତି – ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଧରି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି – ତାହା ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ ।
- ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ (ଯାହା Android OS ସଂସ୍କରଣ 7.0 ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ Apple iOS 16.0 - iPhone 12 ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ - ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ) ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେହି ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ।
- ଏହି ଉପକରଣଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି LED ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ସଠିକ୍ କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ।
- eLupihaler ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ନିଜ ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ରିମାଇଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଔଷଧ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।
- ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI), ପବନର ବେଗ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ରିଆଲ୍-ଟାଇମ୍ (ତତକ୍ଷଣାତ୍) ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ; ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।
- ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଦୈନିକ, ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ DPI ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ ।

eLupihaler ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

- eLupihaler ସହିତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବ ।

eLupihaler କିପରି ଔଷଧ ସେବନ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ?

- eLupihaler ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ (ଯେପରିକି ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଇତ୍ୟାଦି) ସଠିକ୍ ସମୟରେ DPI ନେବା ପାଇଁ ଏକ ରିମାଇଣ୍ଡର ବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- eLupihaler ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର DPI ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ କେତେ ମାତ୍ରା (dosage) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାହା ଦର୍ଶାଏ ।

eLupihaler କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ?

- ଇନହେଲେସନ ତାଟା କ୍ୟାପଚର କରାଯାଏ, ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ଇନହେଲେସନର ଗୁଣବତ୍ତା ମାପିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ । ରଙ୍ଗ କୋଡ୍, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇନହେଲେସନ୍ କୌଶଳକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଉନ୍ନତ କରେ ।



ELUPIHALER ଅନବନ୍ଧିଂ

- ବନ୍ଧୁକୁ ସିଧା ରଖି ମଝିରୁ ଡିଭାଇସକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ବାହାର କରନ୍ତୁ।



- eLupihaler ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ।




eLupihaler ସେଟଅପ୍

- ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ eLupihaler ର ଖେଳକମ୍ ସ୍କିନ୍ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନେଇଥାଏ।



- ଡାଟା ବିନିମୟ ପାଇଁ ଡିଭାଇସକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନର ସଠିକ୍ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଆକ୍ସେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ।

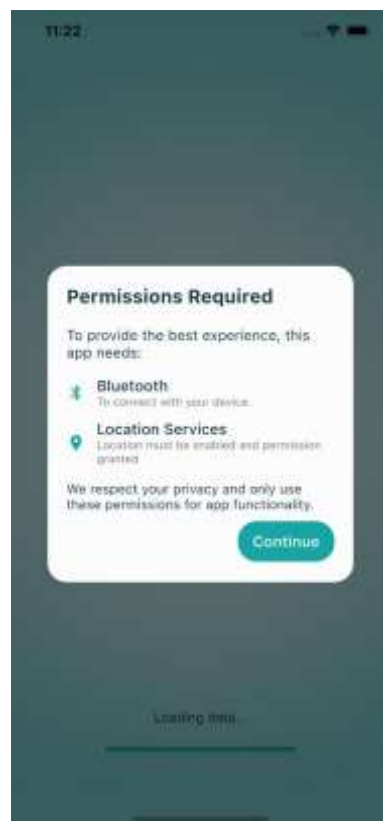

- ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପଢ଼ିବା ପରେ ଦୟାକରି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏବଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।




- ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 'ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ' ପଢ଼ି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ଟେକ୍ସ୍ଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।



- SMS ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଥିବା OTP ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 'Submit' ବଟନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ; ଅଥବା ଯଦି ଆପଣ OTP ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ 'Resend OTP' ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ (60 ସେକେଣ୍ଡର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ) ।




- ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନୁକୃତ ବ୍ୟବହାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏକ 4-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ MPIN ସେଟ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ସୁବିଧା ଚାଲୁ କରିପାରିବେ ।

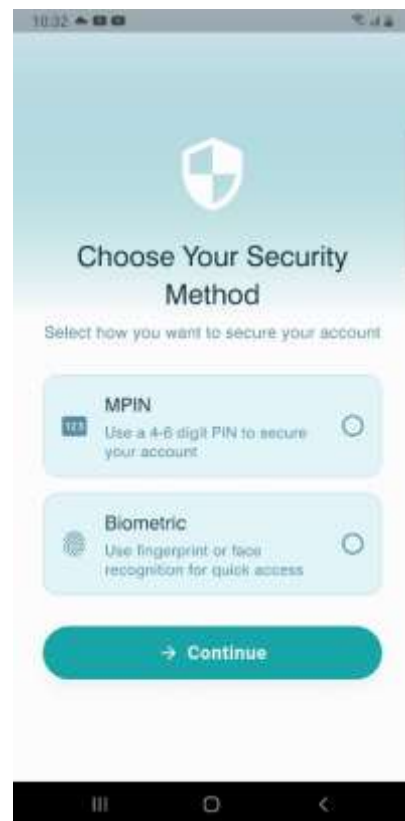


- ଯଦି ଆପଣ MPIN ବିକଳ୍ପ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ 4-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ MPIN ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।




- eLupihaler ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ (ଯାହା ଡିଭାଇସ୍ ସ୍ତରରେ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ।

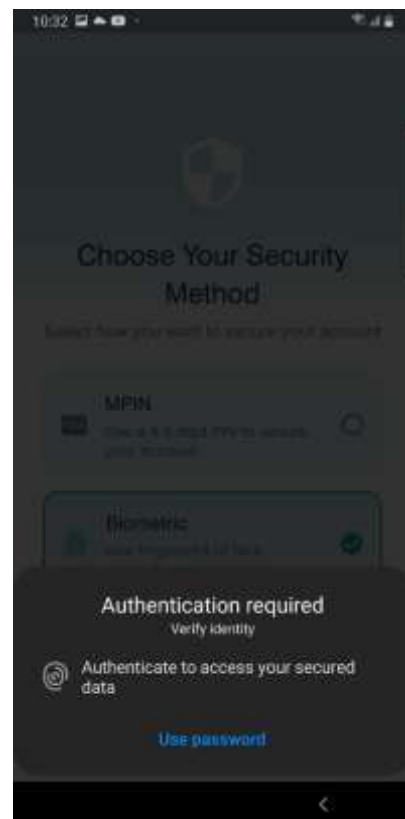

- ଦୟାକରି 'ରୋଗୀ' କିମ୍ବା 'ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି' (Caregiver) ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ରୋଗୀ ଭୂମିକା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ > ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ [Caregiver Flow](#) ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ।

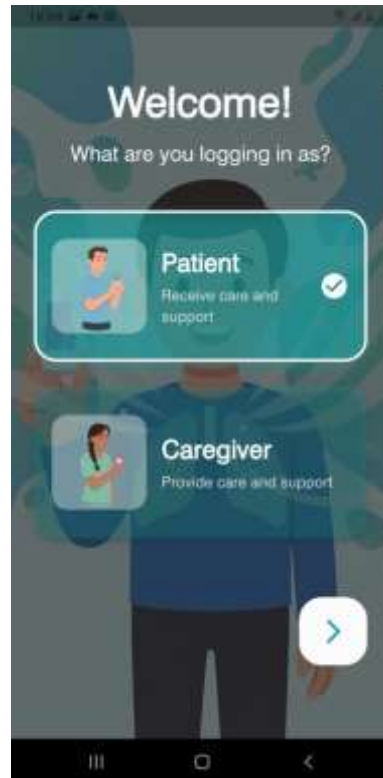

- ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଚୟନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

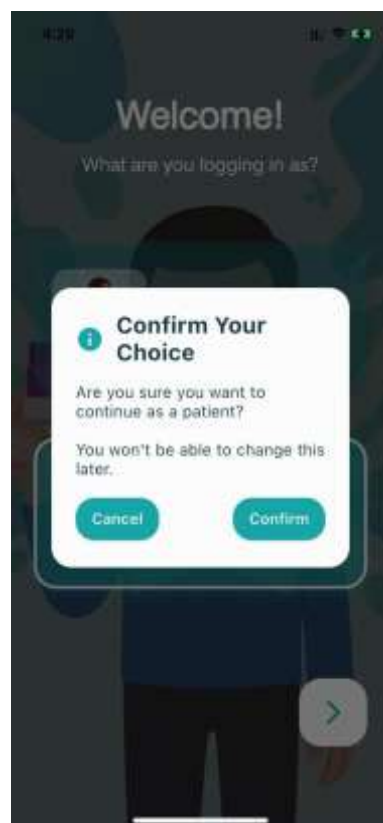

- ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବରଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 'ଜାରି ରଖନ୍ତୁ' (> ବଟନ୍) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।



- ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ମୌଳିକ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।

ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ।

ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ eLupihaler କୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ ।

- ବାକ୍ସକୁ ସିଧା ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରୁ ଡିଭାଇସକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ।



- ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଇନହେଲରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ଧରି ଡ୍ରେରୁ ଇନହେଲରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।



- ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ପାଖାରୁ - ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଲଇଡି ସହିତ ଇନହେଲର୍ ଧରି ରଖନ୍ତୁ ।




- ଡିଭାଇସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ – ଡିଭାଇସ୍ କୁ ଚିଲ୍ଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଟମ୍ କଭରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ ନହୁଏ ।




- ଡିଭାଇସ୍ ଚାଲୁ ହେବା ପରେ, ଡିଭାଇସ୍ ପେୟାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନୀଳ LED ଝଟକୁଥାଏ ।




- Connect Device ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସମୟ ।

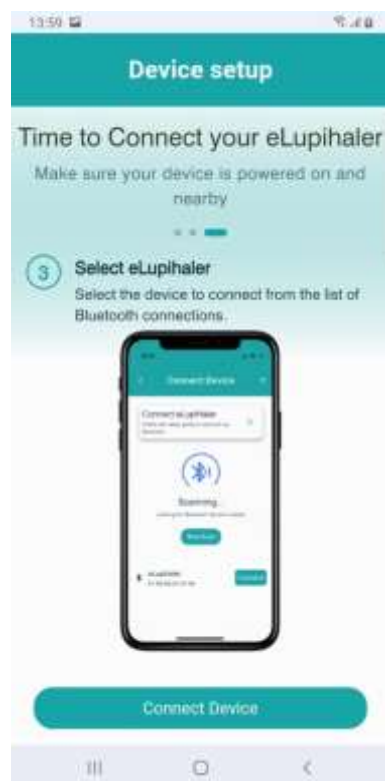


- eLupihaler ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ସ୍କାନ ଫର ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

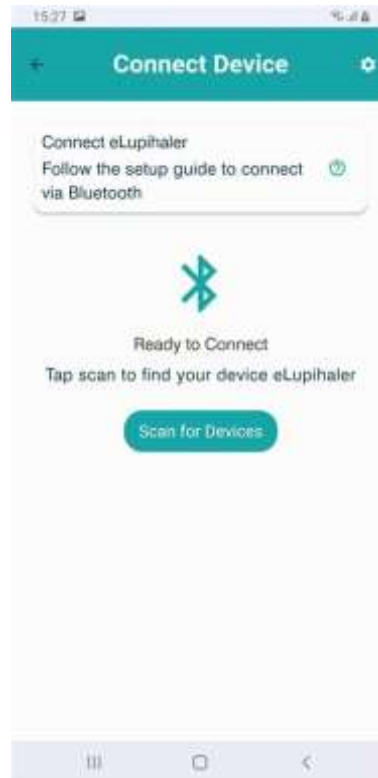

- ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ/ଯୋଡ଼ାଇ ହେବା ପାଇଁ ସ୍କାନ ହୋଇଥିବା eLupihaler ଡିଭାଇସ୍ ତାଲିକାରୁ ଡିଭାଇସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ତାଲିକାରୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତେବେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଝଲସୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୀଳ ଆଲୋକ ଦେଖୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଡିଭାଇସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ବିଭାଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।

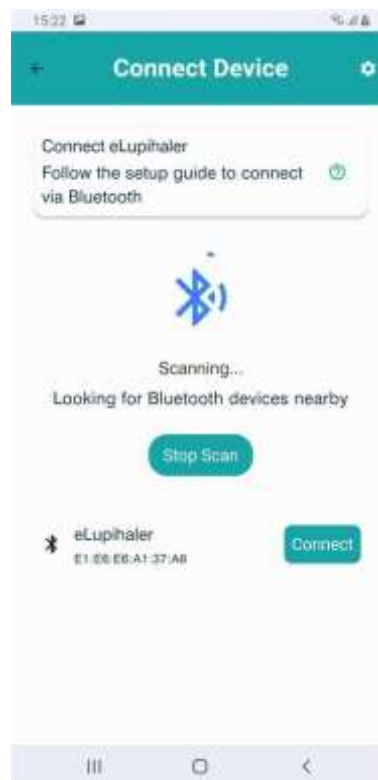

- ଡିଭାଇସ୍ ସଫଳତାର ସହ ପେୟାର ହେବା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇବେ ।
- ଡିଭାଇସ୍ ସେଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ସୂଚୀ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

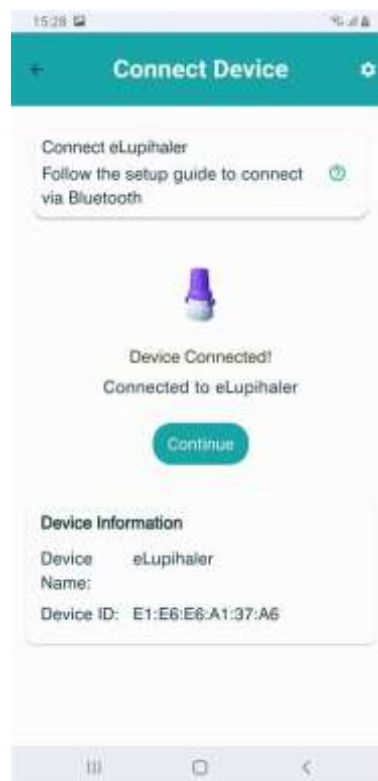

ଡିଭାଇସକୁ ଚାଲୁ କରିବା

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସେଟଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଡିଭାଇସକୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

- ଡିଭାଇସ ଖୋଜିବା (ସ୍କାନ କରିବା) ସମୟରେ, ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୌଣସି eLupihaler ଡିଭାଇସ୍ ଦେଖାଇପାରୁ ନାହିଁ, ତେବେ  ପୁନର୍ବାର 'Scan' (ସ୍କାନ) କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।



- ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ 'Help' (ସହାୟତା) ସ୍ଥିତି ପଦ୍-ଅପ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଯିବ ।




ଔଷଧ ସୂଚୀ ପରିଚାଳନା

ଆପଣ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଏବଂ ଏହାର ସମୟସୂଚୀ ଯୋଡ଼ି କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।

ଔଷଧ ଯୋଡ଼ିବା ।

- ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।

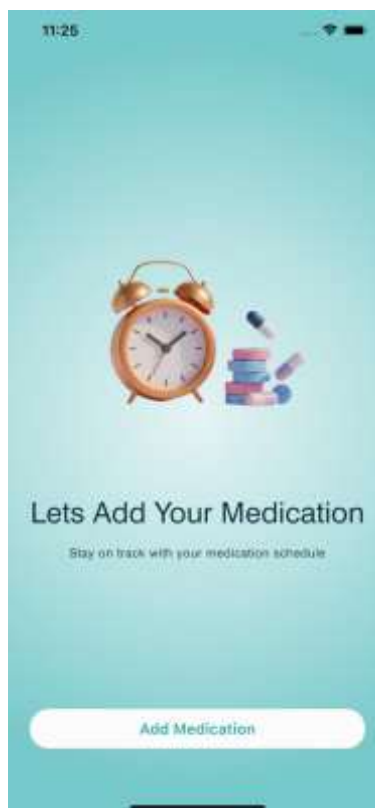

- ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଖୋଜିପାରିବେ, ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଔଷଧ ପାଖରେ ଥିବା > ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଔଷଧ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ ।




- ଆପଣ ଡୋଜ୍ ସୂଚନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅନୁସାରେ ସକାଳ, ଅପରାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଚୟନ କରିପାରିବେ ।




- ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଔଷଧ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି (ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ), ତେବେ 'Add DPI' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଔଷଧ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ 'No, I don't have any other DPI' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।



- ଔଷଧ ସେବନର ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ସତର୍କତା ବା ରିମାଇଣ୍ଡର୍ (reminders) ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଆପରେ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ।

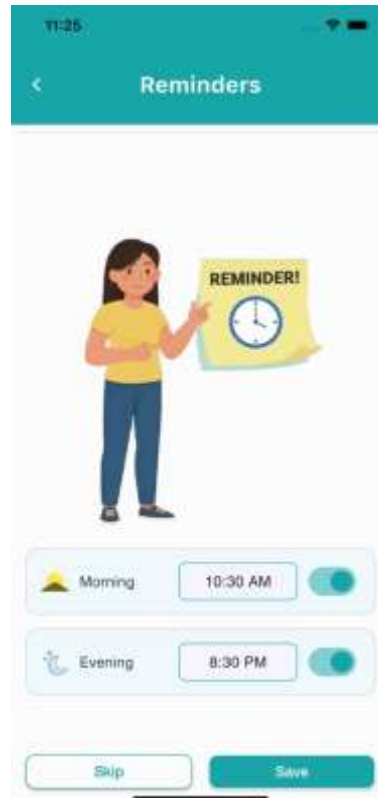

- ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ସେଟ୍ (save) ହୋଇଗଲା ପରେ, 'Let's Go' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

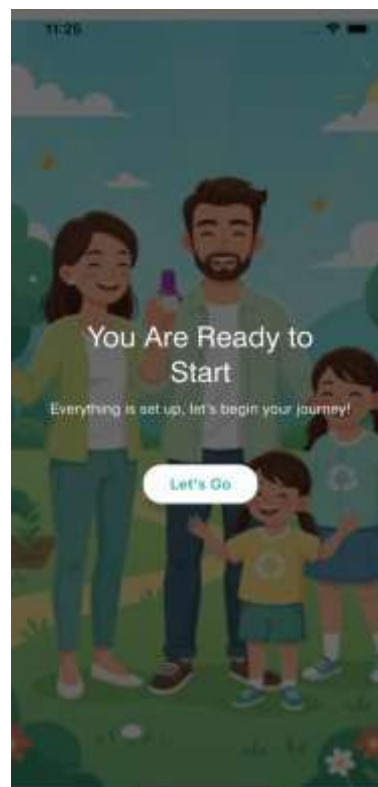

eLupihaler ସହିତ ଔଷଧ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବେ

ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସଫାଳତାର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ କିମ୍ବା ବିନା ସେଥିରେ ଇନ୍‌ହେଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

- ଇନ୍‌ହେଲର୍‌ରୁ ସ୍ୱରକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖାରୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ବା LED ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଭଳି ଇନ୍‌ହେଲର୍‌କୁ ଧରନ୍ତୁ ।



- ଇନ୍‌ହେଲର୍‌ର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ଚିହ୍ନରେ ମାଉଥ୍‌ପିସ୍‌କୁ ବୁଲାଇ ଇନ୍‌ହେଲର୍‌କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ ।



- ଗୋଟିଏ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଇନ୍‌ହେଲର୍‌ର କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଚାମ୍ବରରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- କ୍ୟାପସୁଲ୍‌ଟି କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ କ୍ୟାପସୁଲ୍‌କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ ।



- ମାଉଥ୍‌ପିସ୍‌କୁ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ଘୁରାଇ ଇନ୍‌ହେଲର୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।




- ଇନହେଲରକୁ ସିଧା ଭାବରେ (ମାଉଥପିସ୍ ଉପର ମୁହାଁ କରି) ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ପୁସ୍-ବଟନଗୁଡ଼ିକୁ ଧରନ୍ତୁ। ପାଖାର ଇଣ୍ଡିକେଟର କିମ୍ବା LED ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଭଳି ଇନହେଲରକୁ ଧରନ୍ତୁ।



- ଉଭୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ହୁଟ ଓ ବୃହତ୍ ଟାପ ସହ ଏହି ବଟନଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଦବାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପସୁଲ୍‌ଟି ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଟା ହୋଇଯାଇଛି।

- ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଥିବା ଉଭୟ LED ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳିବା ଓ ଲିଭିବା (blink) ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ରିଆଲ୍-ଟାଇମ୍ (real-time) ଇନହେଲେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ସ୍କାନ ଏବଂ ପେୟାର୍ (pair) କରିପାରିବେ।

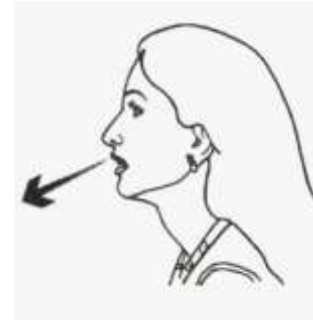

- ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌କୁ ଖାଲି କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ।

- ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ନିଜ ପାଟିଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ LED-ର ଜଳିବା-ଲିଭିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌କୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ।

- ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ରୁ ସମସ୍ତ ବାୟୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ, ଇନହେଲରକୁ ନିଜ ପାଟି ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୂସମାନ୍ତର ଭାବେ (ଆଡ଼ କରି) ଧରନ୍ତୁ।

- ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ପଛକୁ ଘୁଆଁନ୍ତୁ।

- ଇନହେଲରର ମାଉଥପିସ୍‌କୁ (ମୁଖଭାଗକୁ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ପାଟି ଭିତରକୁ, ଦାନ୍ତ ପଛପଟେ ଏବଂ ଜିଭ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ।


- ମାଉଥପିସ୍ ଚାରିପାଖେ ନିଜ ଓଠକୁ ବୃହତ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।

- ଯେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସମ୍ଭବ, ସେତେ ଗଭୀର ଭାବରେ କିଛି ସ୍ଥିର ଗତିରେ ହୁଟ ଗତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ।

- ଯଦି ଇନହେଲରଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏଥିରୁ ଏକ ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ; କାରଣ ପାଉଡରକୁ ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଟାମ୍ବର ଭିତରେ କ୍ୟାପସୁଲ୍‌ଟି ଘୂରିଥାଏ।



- ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଇନହେଲର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଔଷଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଇନହେଲର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ୍ୟାପସୁଲ୍‌ଟି ଖାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ; ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋହରାନ୍ତୁ।

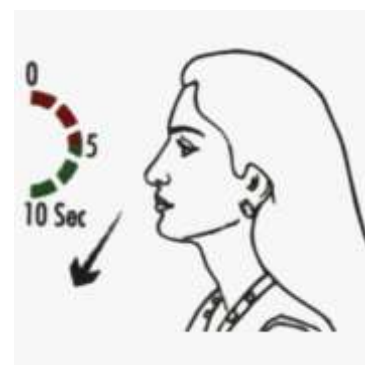

- ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଟି ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ; କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗିଳନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଇନହେଲର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଲି କ୍ୟାପସୁଲ୍‌କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଇନହେଲର ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



- ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ କରିବା:
 - ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଥିବା eLupihaler ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଇନହେଲର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡାଟା ସିଙ୍କ୍ କରିଥାଏ ।
- ଇନହେଲର ସଫା କରିବା:
 - ଆପଣଙ୍କ eLupihaler କୁ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ପାଣିରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ । eLupihaler ଭିତରେ ପାଉଡର ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
 - ଯଦି ମାଉଥ୍‌ପିସ୍ (mouthpiece) ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଇନହେଲେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ (Inhalation Reports) ଦେଖିବା

ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ଆପଣଙ୍କର ଇନହେଲେସନ୍ ତାତା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅନେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ, ଦେଖିବାରେ ଏବଂ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା PDF ଫର୍ମାଟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ ।

- ଆପଣଙ୍କ  ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଔଷଧ ଆନୁପାଳନ ଇତିହାସ ଅନେକ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ।
- ଆନୁପାଳନ ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଟ୍ରେକିଂ ସହିତ ଏକ ଗ୍ରାଫିକାଲ୍ (ଇକ୍ସନ ଗଜ୍) ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ।




- ଆନୁପାଳନକୁ ମିଶ୍ର, ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସୂଚକ ସହିତ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ।




- ରିପୋର୍ଟ  ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଔଷଧ ଇତିହାସ ଚାଲିକାଭୁଲ ହୁଏ।

- ଆପଣ ଇନ୍‌ହେଲେସନ୍ ତାତା ଚାରିପାଖରେ ବିବରଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିପୋର୍ଟ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ।

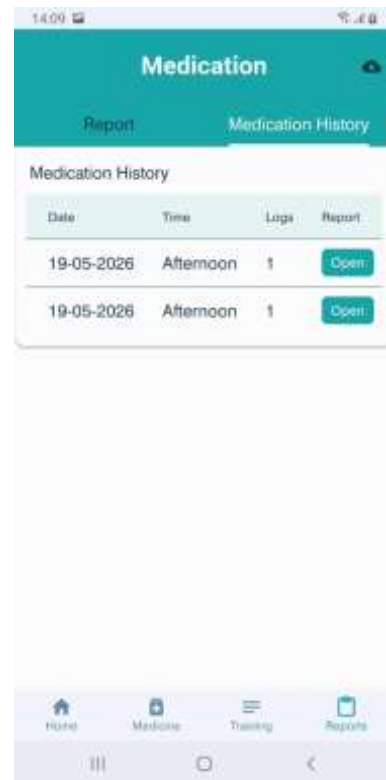

- ଇନ୍‌ହେଲେସନ୍ ତାତା ପ୍ରବାହ ହାର ବନାମ ସମୟ ଗ୍ରାଫ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୌଶଳ ବନାମ ସୁପାରିଶ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ତୁଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

- ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ପ୍ରବାହ ହାର, ଅବଧି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗ୍ରେଡିଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

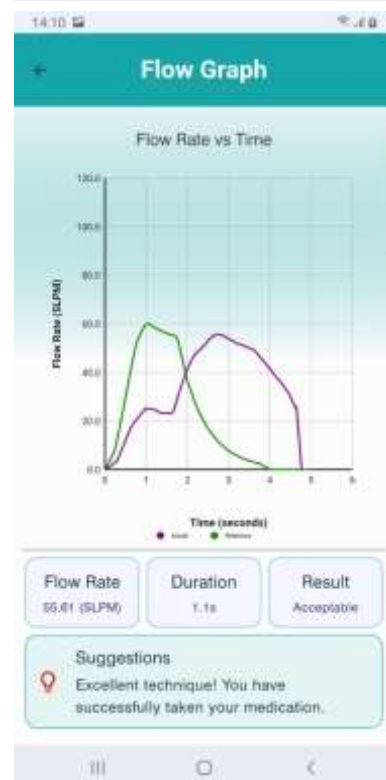

ନିୟମ ସଂପାଦନ କରନ୍ତୁ ।

- ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ ଔଷଧ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

ଚିତ୍ରଣୀ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଔଷଧ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଔଷଧ ପ୍ରବାହ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ।



- ଆପଣ ସକାଳ, ଅପରାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସମୟସୂଚୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ।
- ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟସୂଚୀ ପାଇଁ ଡୋଜ୍ (ଏକକ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ) ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ।




ଜଣେ ଯତ୍ନଦାତା ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି

ଆବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯତ୍ନ ପ୍ରଦାନକାରୀ କିମ୍ବା ଯତ୍ନଦାତା ଭୂମିକାରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ/ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ରଖୁପାରିବେ।


- ହୋମ୍ ସ୍କିନ୍ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଆପଣ 'Caregiver' (ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) ବିଭାଗ ପାଇବେ। ଜଣେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି 'Add a caregiver' ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।



- ଅନୁରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ।

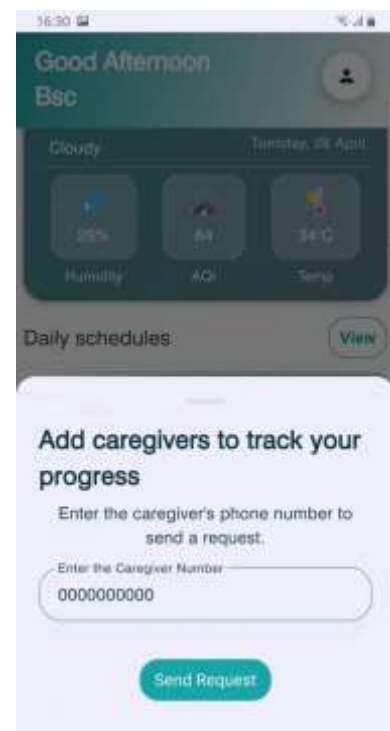

- ଆପଣ 'Caregivers' ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅନୁରୋଧର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ ।

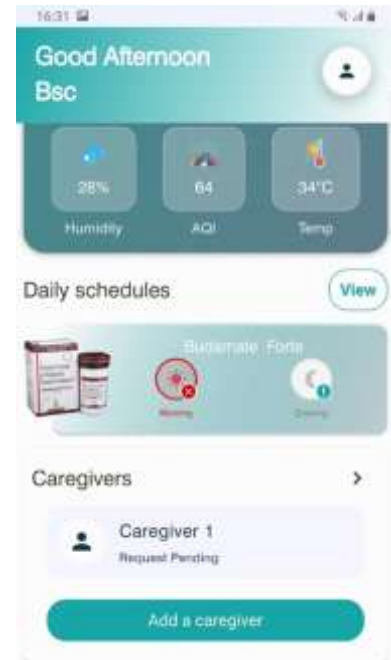


- ଅନୁରୋଧ ସଫଳତାର ସହ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଗଲେ, ଆପଣ ସେହି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ ।
- ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନଙ୍କୁ ଯୋଡିପାରିବେ ।
- ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯତ୍ନବାନଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବେ ।




ଯତ୍ନବାନ ପ୍ରବାହ

ଯଦି ଆପଣ ଅନବୋର୍ଡ଼ିଂ ସମୟରେ ଏକ ଯତ୍ନବାନ ଭୂମିକା ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରବାହକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।


- ଦୟାକରି 'ରୋଗୀ' କିମ୍ବା 'ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି' (Caregiver) ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
- ଯତ୍ନବାନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ପ୍ରବାହ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ

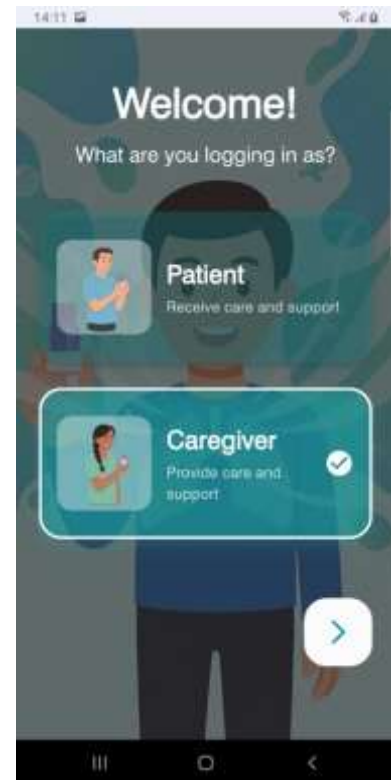

- ଯତ୍ନବାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୟନ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

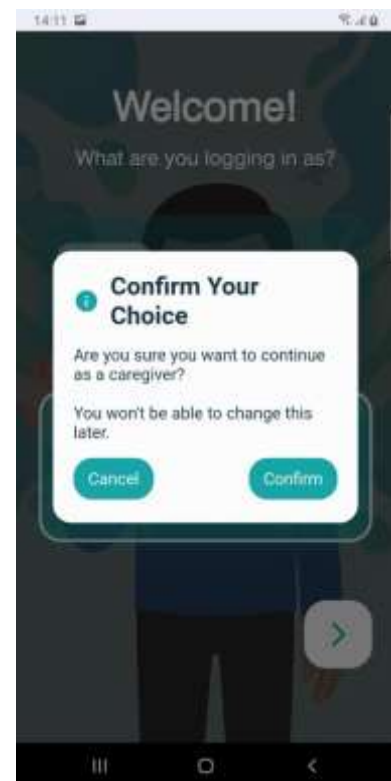


- ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବରଣୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ 'ଜାରି ରଖନ୍ତୁ' (> ବଟନ୍) ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

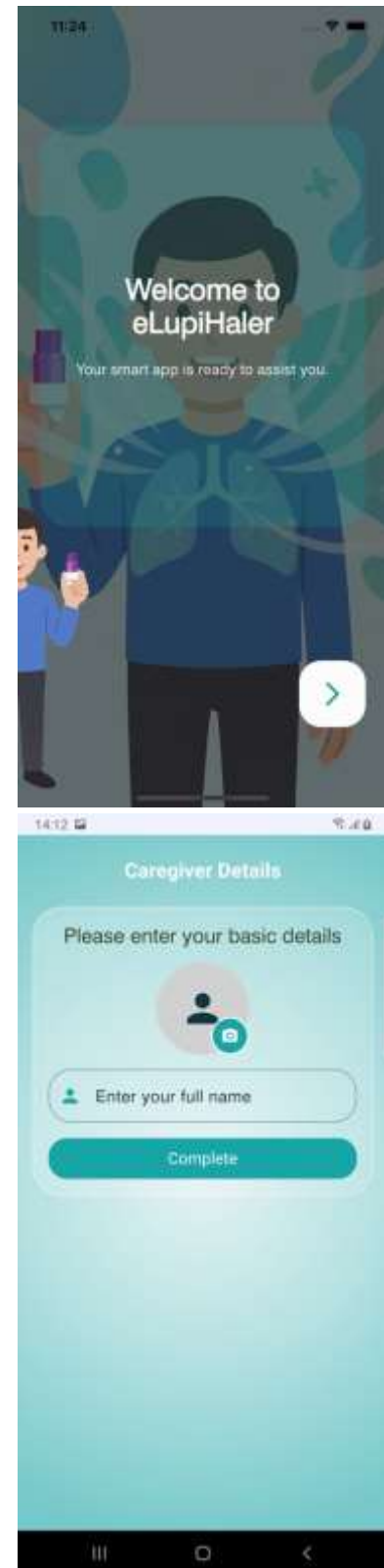


- ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।

- ଯଦ୍ୱଦାତା ଭୂମିକାରେ ସଫଳ ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦ୍ୱଦାତା ଭାବରେ ମ୍ୟାପ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଲିକାଉଛୁ କରାଯିବ ।
- ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁରୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ।

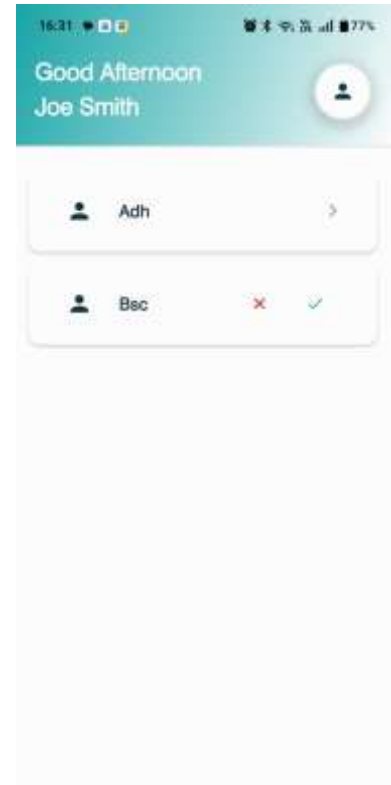


- ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ପରେ, > ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି, ଆପଣ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଔଷଧ ଇତିହାସ ବିବରଣୀ ଦେଖିପାରିବେ ।

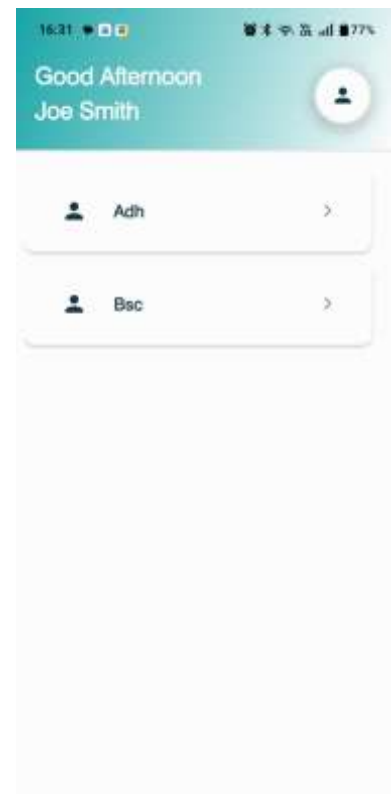

- ରୋଗୀ ରେକର୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗୀ ବର୍ଗନକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରାଯିବ ।



- ରୋଗୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ ।

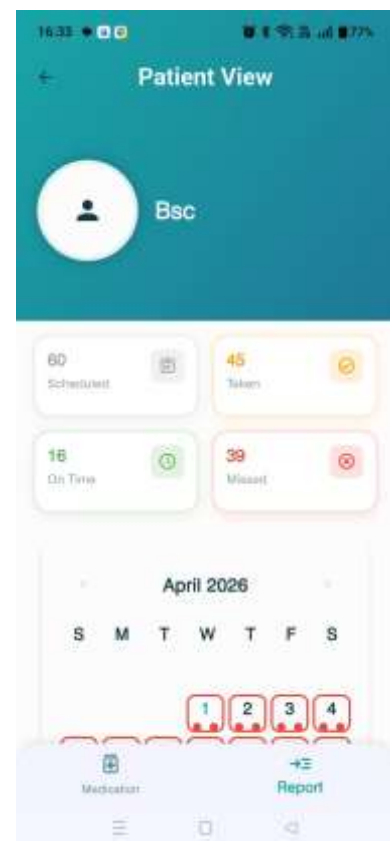

- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାସିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ଗୁଣବତ୍ତା ବିବରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଡାକକୁ ଖୋଲି କରନ୍ତୁ ।



ବ୍ୟାଟେରୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ

- ଏଥିରେ ଥିବା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ (non-replaceable) ବ୍ୟାଟେରୀଟି ସର୍ବାଧିକ 600 ଥର 'ପଫ୍' (puffs) ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଏହି ଉପକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା

- ବିଶ୍ଳେଷକ ପଦାର୍ଥ ନିକଟରେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳି ଏବଂ କମ୍ପାନ ଥିବା ପରିବେଶରେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଉପକରଣକୁ ଉତ୍ତାପର ଉତ୍ତ ନିକଟରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଉପକରଣକୁ ଏକ ଶୁଷ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ।
- eLupihaler ରେ ଏକ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି; ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ନିଷ୍କାସନ (disposal) କରନ୍ତୁ।

1.1. ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିତି:

ତାପମାତ୍ରା ପରିସର: 10°C ରୁ 40°C।

ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର: 20% ରୁ 90%।

ବାୟୁଚାପ ପରିସର: 600 mBar ରୁ 1060 mBar।

ଏହି ଉପକରଣଟି 2,000 ମିଟର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

1.2. ସଂରକ୍ଷଣ:

ତାପମାତ୍ରା ପରିସର: 5°C ରୁ 40°C।

ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର: 5% ରୁ 95%।

1.3. ପରିବହନଯୋଗ୍ୟତା।

ତାପମାତ୍ରା ପରିସର: 5°C ରୁ 40°C।

ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିସର: 5% ରୁ 95%।

ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ

	ଏକ ତାରିଖ ସହିତ, ଏହି ପ୍ରତୀକ ଡିଭାଇସର ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖକୁ ସୂଚିତ କରେ।
	ଏହି ପ୍ରତୀକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ସୂଚନା ପାଇଁ ଡିଭାଇସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ।
	ଆଇନଗତ ନିର୍ମାତା (ଲୁପିନ୍ ଲିମିଟେଡ୍) କୁ ସୂଚିତ କରେ।
	କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ଡିଭାଇସର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ।
	ସାଧାରଣ ଚେତାବନୀ ଚିହ୍ନ
	ବ୍ୟାଚ୍ କୋଡ୍
IP21	ଇନଗ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ (ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର) IP2X: 12.5 ମିମିରୁ ବଡ଼ କଠିନ ବସ୍ତୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ । IPX1: ଉପରୁ ସିଧାସଳଖ ପଡୁଥିବା ପାଣି ବୁନ୍ଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରକ୍ଷିତ
	ML ରେ ଔଷଧର ମାତ୍ରା
	ବର୍ଷାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ
	ଭଙ୍ଗୁର, ଯତ୍ନ ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
	ତାପମାତ୍ରା ସୀମା 10°C 40°C
	ଆର୍ଦ୍ରତା ସୀମା 5% 95%
	ଯଦି ପ୍ୟାକେଜ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
	ବ୍ୟବହାରର ଶେଷ ତାରିଖ

ସତର୍କତା

- eLupihaler ଉପକରଣକୁ ଯତ୍ନ ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଯେପରି ତଳେ ନ ପଡ଼େ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଉପକରଣଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

- eLupihaler ଡିଭାଇସ୍‌କୁ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଗୋଟିଏ eLupihaler ଡିଭାଇସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
- ଯଦି ଡିଭାଇସ୍‌ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ବଟନଗୁଡ଼ିକୁ ଦବାଇବା ସମୟରେ ନୀଳ ଏବଂ ସବୁଜ ଆଲୋକ ପାଲିକ ଭାବରେ ଝଲସୁଆଏ, ତେବେ ଏହା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ ।

ଅନୁପାଳନ ଆବଶ୍ୟକତା

ସନ୍ଦର୍ଭ ମାନକ:
IEC 60601-1: ଡାଇରୀ ଉପକରଣ: ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ।
IEC 60601-1-2: ଡାଇରୀ ଉପକରଣ: ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମାନକ: ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅନୁକୂଳତା ।
IEC 62304: ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ - ସଫ୍ଟୱେର୍ ଜୀବନଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
ISO 14971: ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ - ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରୟୋଗ ।
ISO 13485: ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ - ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

ବୈଦ୍ୟୁତିକ-ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅନୁକୂଳତା: IEC 60601-1-2: 2014

ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ	IEC 60601 ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ତର	ଅନୁପାଳନ ସ୍ତର
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଡିସଚାର୍ଜ (ESD) IEC 61000-4-2	±8kV (କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ), ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV (ଐନ୍ଦ୍ରିକ ଡିସଚାର୍ଜ)	±8kV (କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ), ±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV (ଐନ୍ଦ୍ରିକ ଡିସଚାର୍ଜ)
RF ରେଡିଏଟେଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି IEC 61000-4-3	3 V/m (ଘରୋଇ ସ୍ୱାକ୍ଷୟସେବା ପାଇଁ 10V/m), 80 - 2,700MHz ରେ, AM ମୋଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ।	3 V/m (ଘରୋଇ ସ୍ୱାକ୍ଷୟସେବା ପାଇଁ 10V/m), 80 - 2,700MHz ରେ, AM ମୋଡ୍ୟୁଲେସନ୍ ।
ପାୱାର୍ ପ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ (PFMF) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m